



Specjaliści z zakresu „Likwidacji Barrier”

Firma **LeviCare** pomogła już tysiącom klientów na terenie Polski, a także za granicą. W grupie zadowolonych z urządzeń użytkowników znalazły się osoby prywatne, ośrodki opiekuńcze oraz szpitale. Ogromna ilość usatysfakcjonowanych klientów to dla pracowników firmy **LeviCare** największa radość.

LeviCare jest polskim producentem i dystrybutorem podnośników oraz akcesoriów ułatwiających opiekę nad osobami z niepełnosprawnościami. Wykwalifikowani inżynierowie i specjaliści z dziedziny inżynierii mechaniczno-medycznej oraz opieki nad osobami z niepełnosprawnością są wizytówką firmy. Współpraca z Politechniką Gdańską, opiekunami osób z niepełnosprawnością, fizjoterapeutami oraz lekarzami umożliwia tworzenie i dopasowywanie doskonałych systemów do opieki.

Wszystkie produkty oferowane przez **LeviCare** są starannie testowane i sprawdzane, tak aby wykazywały się najwyższą jakością europejską.



Misja

Misją firmy jest pomoc osobom z niepełnosprawnością oraz ich opiekunom w wykonywaniu codziennych czynności, a także usprawnianie pracy personelowi i zwiększanie bezpieczeństwa pacjentów w zakładach opieki i szpitalach.



Udział w programie



jako ekspert

Partnerzy:



aks



Jak działamy:



Działamy na terenie całej Polski

Firma LeviCare posiada pomieszczenia demonstracyjne, przedstawicieli i specjalistów na terenie całego kraju. Zapewnia także profesjonalną obsługę w każdym regionie z zakresu doradztwa, szkoleń, montażu i serwisu urządzeń.



Darmowa prezentacja sprzętu

Na spotkaniu w umówionym miejscu prezentujemy urządzenia oferowane przez firmę LeviCare. Sprzęt można przetestować i sprawdzić, a także zadawać pytania wykwalifikowanym specjalistom. Na spotkaniu poznajemy potrzeby klienta, uzyskujemy niezbędne informacje, a także pobieramy wymiary, które pozwalają stworzyć kosztorys i wizualizację systemu do opieki. Umożliwiamy także pokazy on-line.



Wizualizacja i kosztorys

Uzyskując informację od klienta na prezentacji, po rozmowie telefonicznej lub korespondencji mailowej przygotowujemy wizualizacje i wyceny najkorzystniejszych systemów do opieki. Zawsze przedstawiamy możliwości finansowania, a także przyszłej rozbudowy systemu.



Wybór najlepszego rozwiązania

Systemy do opieki LeviCare są zawsze dopasowane do potrzeb i warunków finansowych klienta. Nasi specjaliści fachowo doradzają, a klient sam decyduje, którą opcję chce zakupić.




Kompleksowy montaż i szkolenie

Wszystkie systemy i urządzenia montowane są przez specjalistów firmy LeviCare ze względu na bezpieczeństwo, trwałość, funkcjonalność i wygodę w użytkowaniu. Po montażu zawsze wykonywane jest szkolenie z zakresu użytkowania i eksploatacji sprzętu.



Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Urządzenia, które dostarczamy i instalujemy, są często niezbędne do codziennego funkcjonowania, dlatego klientów w całej Polsce obejmujemy błyskawiczną opieką techniczną.

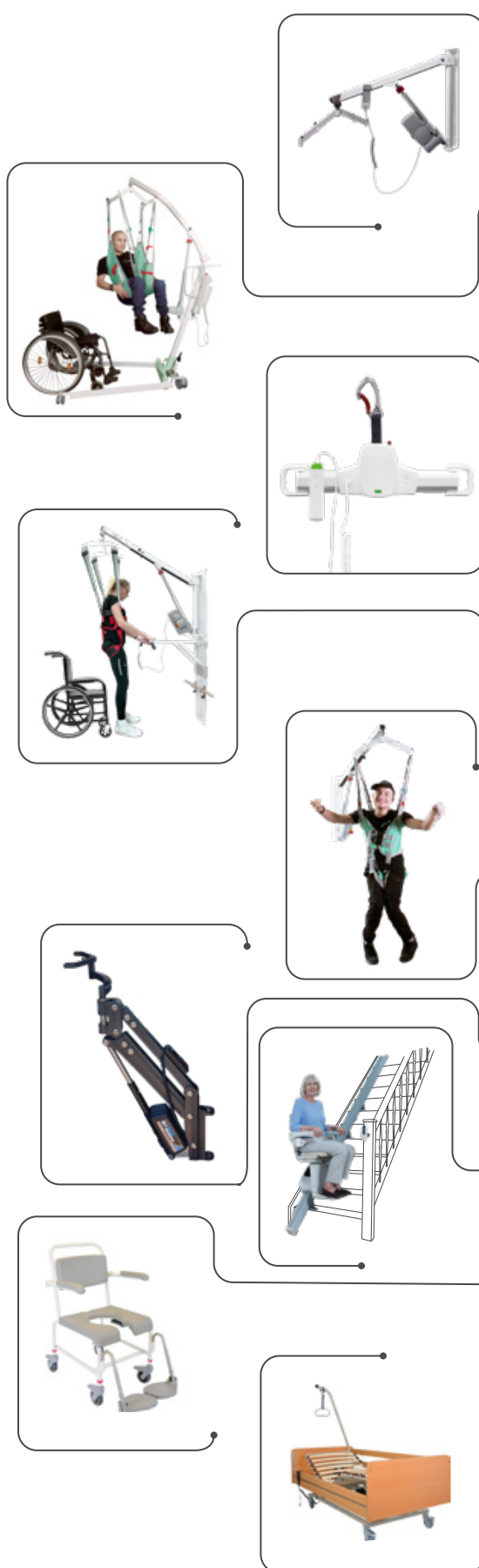

	1. Nowe produkty	4
	2. System do opieki LeviCare Q140	6
	• Podnośnik LeviCare Q140	6
	• Rama jezdna	9
	• Akcesoria	10
	3. Podnośniki jezdne	12
	• Podnośnik jezdny LeviCare J130/J160/J190	12
	 Podnośnik jezdny LeviCare J160 Mini	14
	• Akcesoria	16
	• AKS: Clino II, Goliath, Foldy, Dualo	17
	4. Układy szyn	18
	• Rodzaje instalacji systemów sufitowych	18
	• Zwrotnica, Gate	19
	• Elementy montażowe i akcesoria dodatkowe	20
	5. Podnośniki Sufitowe	23
	 GoLift Portable 450	24
	 Podnośnik GoLift	26
	• Heymer Uno Light	28
	• Heymer Uno	29
	• Heymer Duo	30
	• Akcesoria	31
	6. Reedukacja chodu, pionizacja i fizjoterapia	32
	 LeviActive - System do Ćwiczeń i Rehabilitacji	32
	• LeviKam Trainer	33
	• Przykładowe ćwiczenie z LeviActive	36
	 Pionizator i podnośnik jezdny LeviCare J160 Mini	37
	• Pionizatory: StehFix, Torneo II, Dualo	38
	7. Kamizelki i siedziska	39
	• Zastosowanie kamizelek; zakładanie kamizelek	40
	• LeviKam: Standard, +, Active	41
	• LeviKam: Full Back, Active z podparciem głowy, Amputee	42
	 LeviKam: 8-pkt, do reedukacji chodu, na zamówienie	43
	 LeviKam - kolor do wyboru, Siedzisko Butler, Temblak TTG	44
	8. Adaptacja samochodu - transfer osób	45
	• Smart Transfer	45
	• HandyLift	46
	• Help V, Smart Lifter LM/LC/LP	47
	10. Rozwiązania stosowane na schody	48
	 Prostoliniowe krzeselka schodowe Handicare	48
	• Krzywoliniowe krzeselka schodowe Handicare	49
	11. Krzesła toaletowo - kąpielowe HMN	50
	• M2 Standard, Multi-Tip, Gas-Tip; Nielsen Line Standard	50
	• Akcesoria	51
	12. Łóżka	52
	• AKS: Łóżko L4 / L5, Łóżko S4	52
	• AKS: Łóżko D4, Rama AKS B4 compact	53

Nowe produkty



Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych

do 95% dofinansowania

Pionizator i Podnośnik jezdny

LeviCare J160 Mini

J160MINI-M/E

Najmniejszy na rynku podnośnik jezdny, który poprzez wymianę ramienia w łatwy sposób można przekształcić w pionizator. Dedykowany użytkownikom posiadającym ograniczoną przestrzeń mieszkalną.

Strona 14



LeviActive - System do Ćwiczeń i Rehabilitacji

PKLC-A

LeviActive to nowoczesne urządzenie, wspierające użytkownika z niepełnosprawnością podczas ćwiczeń, a w połączeniu z podnośnikiem ściennym LeviCare Q140 umożliwia także ćwiczenia w odciążeniu.

Strona 32



LeviKam: na zamówienie i kolor do wyboru

Firma LeviCare, jako producent kamizełek LeviKam, za dodatkową opłatą umożliwia modyfikację kamizełek, dopasowując je zarówno do potrzeb fizycznych przy wsparciu specjalistów, jak i estetycznych, umożliwiając dobór kolorów materiału i pasów.


Strona 42



GoLift Portable 450

GO-LIFT-PORT-450-WR

Najmniejszy podnośnik sufitowy na rynku. Jego waga to 2,7 kg a udźwig maksymalny, to aż 204 kg! Podnośnik ten może być montowany na szynach wszystkich producentów.

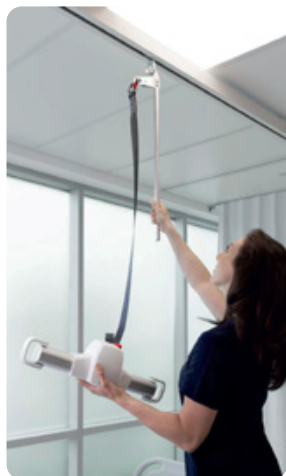

Strona 24



Udźwig do 204 kg!

Waży jedynie 2,7 kg

Podnośnik GoLift

GO-LIFT-400 lub GO-LIFT-700

Zaprojektowany w taki sposób, aby maksymalnie ograniczyć przenoszenie bakterii a czyszczenie i dezynfekcja jego powierzchni były jak najprostsze. Podnośnik jest wyjątkowo łatwy w obsłudze, dzięki wygodnemu pilotowi.

Strona 26



Udźwig do 118 kg
lub 317 kg!

Waży jedynie 4,5 kg





Krzeselka schodowe Handicare

KS-SCH-HC-1

Dzięki różnorodnym modelom oraz dodatkowym funkcjom urządzenia te sprostają zróżnicowanym potrzebom naszych użytkowników. Krzeselka są dostępne w wersji na schody proste oraz z zakrętami.

Strona 52

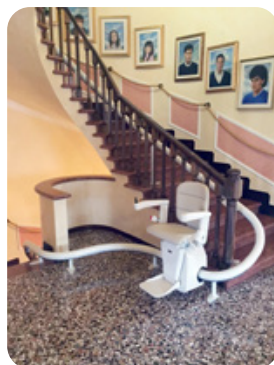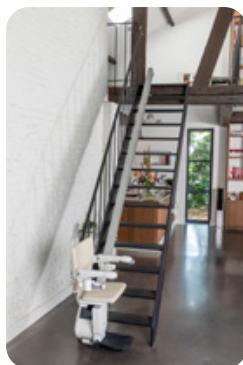

Nowe produkty

5

System do opieki LeviCare Q140

Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
do 95% dofinansowania

Podnośnik LeviCare Q140

PKLC-01



Główne zalety urządzenia:

- siedmiostopniowa regulacja długości ramienia;
- różne możliwości montażowe w zależności od warunków architektonicznych pomieszczenia;
- możliwość dopasowania podnośnika w każdym pomieszczeniu;
- udźwig 140 kg oraz obrót 180 stopni;
- najlżejszy podnośnik ścienny na rynku;
- możliwość przenoszenia podnośnika między podstawami zamontowanymi w różnych pomieszczeniach;
- minimalna ingerencja w strukturę budynku nie wymaga remontów i przeróbek pomieszczeń;
- zasilany sieciowo lub akumulatorowo;
- możliwość dopasowania podnośnika do potrzeb dzięki rozbudowanej ofercie akcesoriów.




Elementy systemowe Q140:



Zastosowanie Q140:

LeviCare Q140 to uniwersalny system, który może być dopasowany do każdego pomieszczenia. Innowacyjny sposób instalacji pozwala na używanie jednego podnośnika do wielu podstaw. Urządzenie może być wykorzystywane jako podnośnik transportowy, kąpielowy, toaletowy lub basenowy. Podnośniki Q140 są częstym rozwiązaniem do transferu w portach lub stadninach koni, aby umożliwić transfer osób na konie, kajaki, łódki, żaglówki lub motorówki.

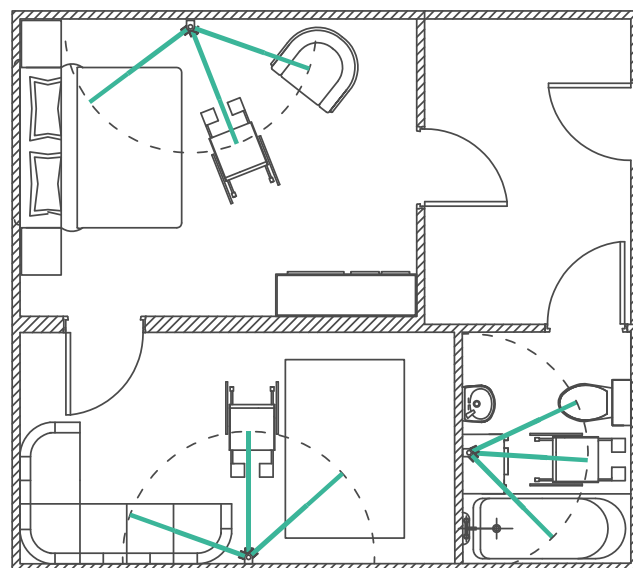


Opcje montażowe:


Montaż podnośnika LeviCare Q140 wykonywany jest przez wykwalifikowanych specjalistów w sposób funkcjonalny oraz zapewniający bezpieczeństwo użytkownika. Przed instalacją urządzenia sprawdzane są warunki architektoniczne pomieszczeń oraz wytrzymałość ścian i sufitów. Biorąc pod uwagę potrzeby klienta oraz uwarunkowania lokalu, wybierana jest jedna z opcji montażowych. Dzięki temu podnośnik Q140 może być zamontowany w każdym pomieszczeniu i spełniać wszystkie wymogi osoby z niepełnosprawnością oraz opiekuna.

Podnośnik LeviCare Q140 może być także zamontowany na ramie jezdnej.

Strona 9

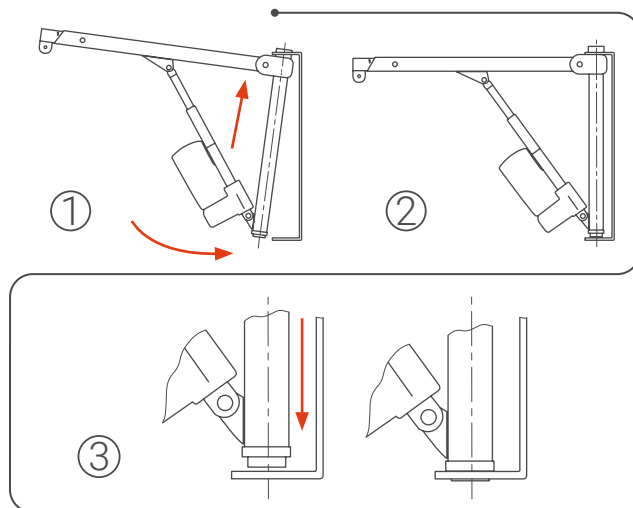

Sposoby montażu podnośnika Q140:

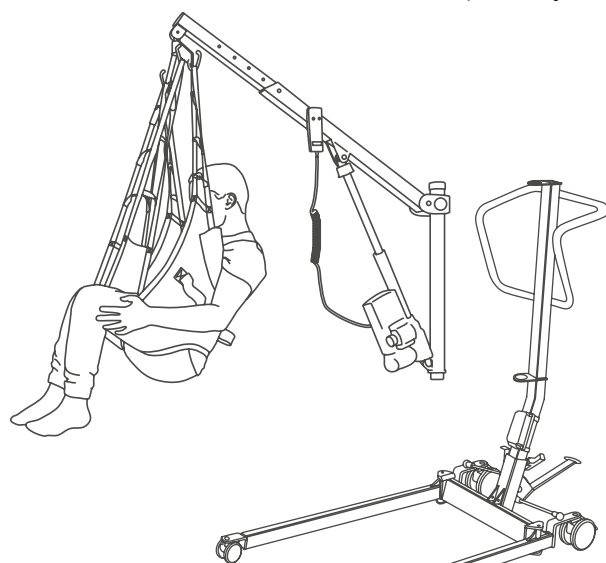

Rama jezdna
LCQ140-R


Strona 9

Rama ścienna Leviactive
PKLC-A


Strona 32




Podstawa
ścienna
APLC-04

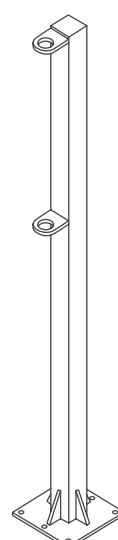


Słupek
do podłogi
APLC-06

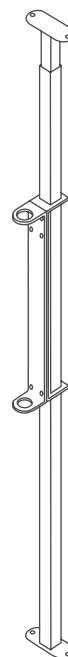

Słupek
podłoga-sufit
APLC-05

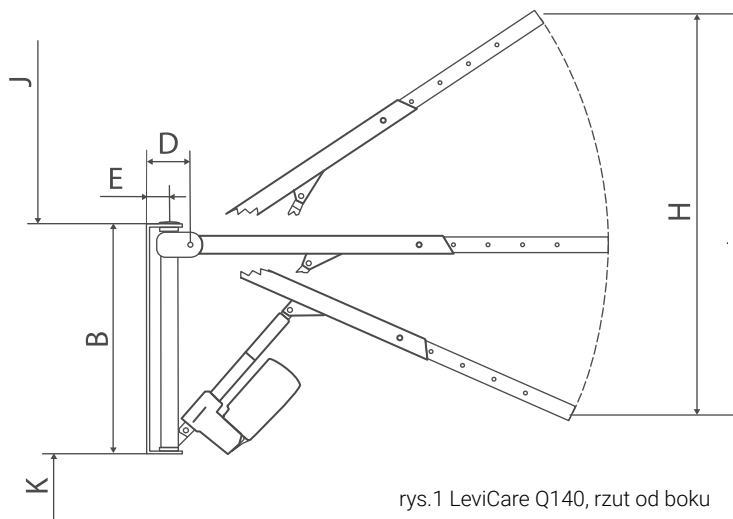

rys.1 LeviCare Q140, rzut od boku

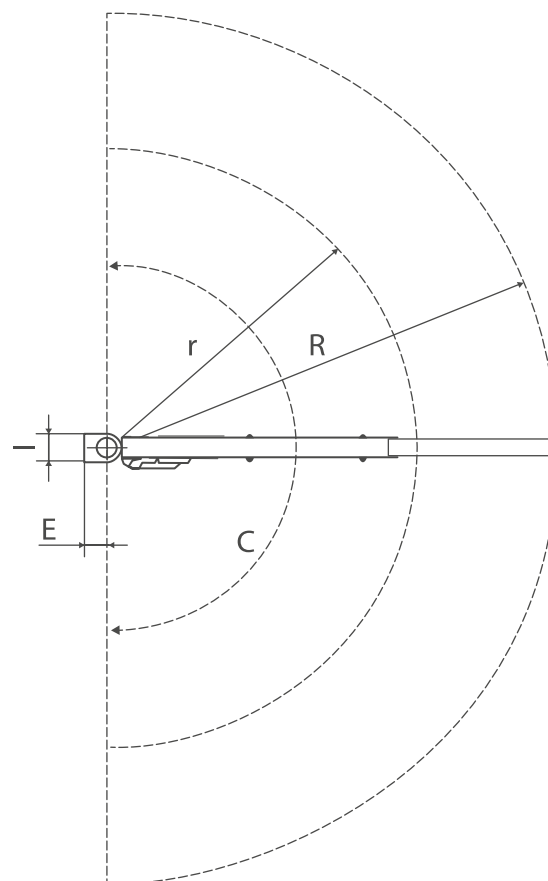

rys.2 LeviCare Q140, rzut od góry

Wymiary (Rysunek 1,2)

R - Zasięg ramienia	920mm- 1340mm
B - Wysokość urządzenia	735 mm
C - Promień obrotu	0° - 180°
D - Odległość poziomej osi obrotu od ściany	125 mm
E - Odległość pionowej osi obrotu od ściany	65 mm
H - Zakres podnoszenia	1130mm
I - Szerokość podstawy	80 mm
J - Min. odległość mocowania podstawy od sufitu	670 mm
K - Standardowa wysokość montażu podstawy	850 mm
Całkowita masa (bez podstawy, wieszaka, kamizelki)	12,5 kg
Max. obciążenie	140 kg
Siła potrzebna do obsługi pilota	≤5N
Poziom hałasu	≤44dB


Dane elektryczne

Prąd zasilający skrzynkę kontrolną	230V AC, 50Hz, 1000mA
Prąd wychodzący ze skrzynki kontrolnej	24V DC, 100VA (Max)
Prąd zasilający siłownik	24V DC
Max. pobór prądu (siłownik)	7A
Bateria Q140	2,2Ah; 24V
Klasa szczelności baterii Q140	IP66
Klasa szczelności skrzynki kontrolnej	IP66
Klasa szczelności siłownika	IP66
Klasa szczelności pilota	IP66
Cykl pracy	10% lub 1 minuta pracy ciągłej, a następnie 9 minut przerwy

Rama jezdna

LCQ140-R


Rama jezdna wraz z zasilaniem akumulatorowym umożliwia wykorzystanie podnośnika LeviCare Q140 jako podnośnika jezdnego. Składa się z dwóch, rozłącznych elementów: masztu oraz bazy jezdnej. Montaż podnośnika Q140 do ramy jest niezwykle prosty, a wysokiej jakości elementy układu jezdnego pozwalają na łatwy transfer. Baza jezdna posiada regulacje rozstawu płóz, co zapewni bezproblemowy podjazd pod wózek inwalidzki, wannę, fotel czy łóżko. Rozwiązanie takie świetnie sprawdzi się w przypadku wyjazdów poza miejsce zamieszkania. Maksymalny udźwig dla podnośnika Q140 w ramie jezdnej wynosi 110kg.

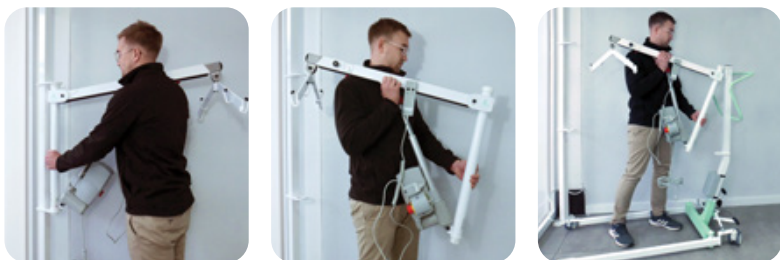

Maksymalny udźwig ramy jezdnej wynosi 110 kg.



Budowa Ramy jezdnej

1. Uchwyt
2. Mocowanie podnośnika LeviCare Q140
3. Bateria do podnośnika LeviCare Q140
4. Pedał nożny
5. Maszt ramy jezdnej
6. Koło tylne z hamulcem
7. Płozy
8. Koło przednie

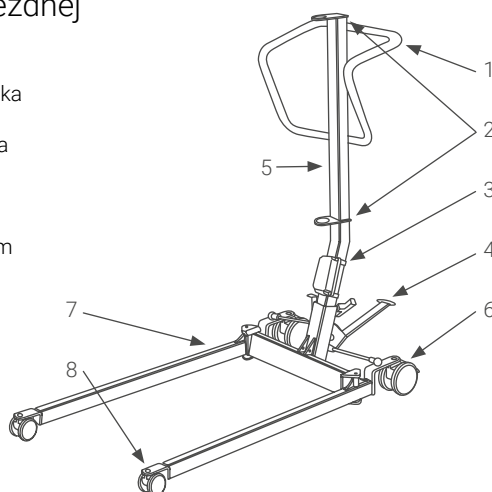

WYMIARY RAMY JEZDNEJ

A – wysokość urządzenia	1400 mm
B – wysokość uchwytu	980 – 1310 mm
C – zakres głębokości użytkowania	550 – 750 mm
E – długość podstawy	1200 mm
F – długość urządzenia	1510 mm
G – wysokość płóz	88 mm
H – zakres podnoszenia	1020 – 1880 mm
I – szerokość uchwytu	522 mm
J – szerokość urządzenia	630 mm
K – szerokość wewnętrznej powierzchni użytkowania	530 mm
L – długość ramienia w maszcie	900 – 1080 mm
R – zakres rozstawu płóz	620 – 1080 mm
Ø D1 – średnica przedniego koła	75 mm
Ø D2 – średnica tylnego koła	100 mm
Całkowita masa (bez podnośnika)	29 kg
Max. Obciążenie	110 kg

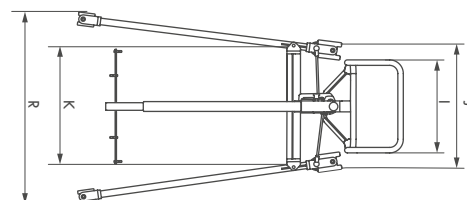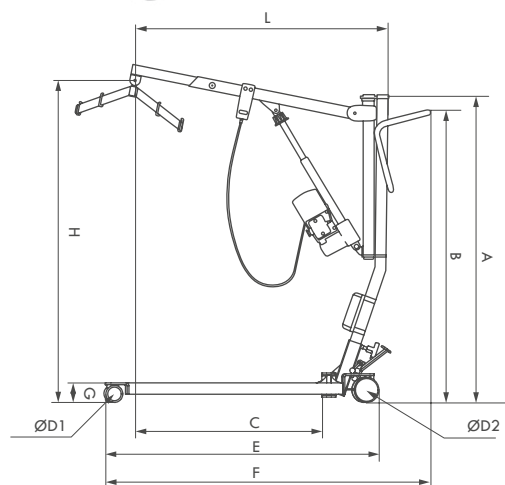

Akcesoria



Wieszak płaski

APLC-01

Standardowy wieszak płaski (czteropunktowy) do podnośnika umożliwia transfer osoby z niepełnosprawnością w pozycji siedzącej i półleżącej. Może być stosowany z każdym typem kamizelki poza 8-punktową.



Wieszak przestrzenny

APLC-02

Przestrzenny wieszak (czteropunktowy) zapewnia swobodę i zwiększa komfort osoby podnoszonej, szczególnie osób z nadwagą. Umożliwia transfer w pozycji siedzącej lub półleżącej. Może być stosowany z każdym typem kamizelki. Dostępny w różnych wymiarach.



Wieszak ośmiopunktowy

APLC-03

Wieszak ośmiopunktowy pozwala na podnoszenie użytkownika z niepełnosprawnością wyłącznie w pozycji leżącej. Wymaga specjalnej kamizelki ośmiopunktowej do podnoszenia w pozycji leżącej.



Wieszak na wymiar

APLC-12

Wieszak z możliwością dopasowania do indywidualnych potrzeb użytkownika z uwzględnieniem określonego schorzenia. Do tego typu wieszaka niezbędne jest dokonanie pomiaru przez specjalistę oraz dokładne dopasowanie kamizelki.



Adapter Q140

APLC-08

Poprawia możliwości manewrowe i powiększa zasięg roboczy podnośnika Q140, dodając dodatkową oś obrotu.



Akumulator

APLC-10

Bateria zewnętrzna umożliwia korzystanie z podnośnika w razie awarii prądu lub jako niezależne od sieci urządzenie. Bateria posiada włącznik oraz sygnalizację stanu naładowania.



Waga LeviCare

APLC-07

Urządzenie, które pozwala zważyć użytkownika w trakcie podnoszenia. Jest kompatybilna ze wszystkimi podnośnikami Levicare.





LeviActive

PKLC-A

LeviActive jako akcesorium do ramienia LeviCare Q140 stanowi doskonały dodatek i uzupełnienie dla osób planujących wykonywanie ćwiczeń w odciążeniu we własnym domu lub gabinecie fizjoterapii.

Realizacje

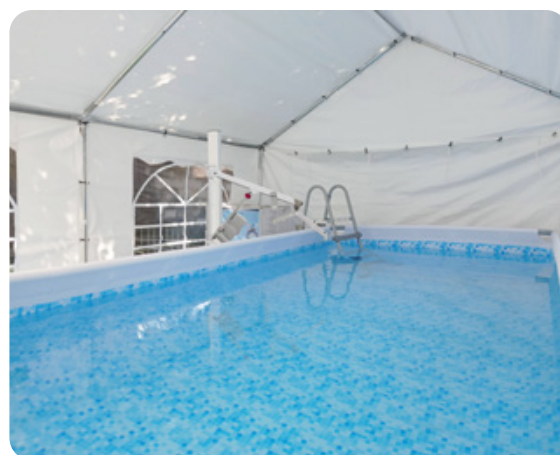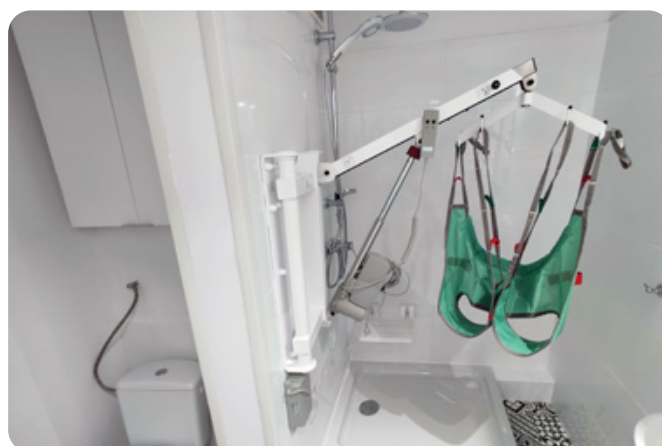



Podnośniki jezdne

Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
do 95% dofinansowania

Podnośnik jezdny LeviCare J130/J160/J190



J130/160/190-M/E

Główne zalety urządzenia:

- różne wersje urządzeń dopasowane do potrzeb i wymogów klienta;
- wymienne akumulatory (opcjonalnie ze stacją ładującą);
- szeroki zakres transferowy, w tym możliwość podnoszenia z poziomu podłogi;
- bardzo niska podstawa jezdna;
- wymienne wieszaki i akcesoria;
- sterowanie za pomocą intuicyjnego pilota lub przycisków na skrzynce sterującej;
- zasilanie akumulatorowe (ładowane sieciowo);
- łatwy w przechowywaniu i transporcie (możliwość złożenia).




Możliwość rozłożenia podnośnika na czas transportu



Wygodny Uchwyt




Sterowany za pomocą pilota lub panelu sterowania na skrzynce kontrolnej

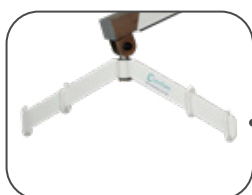

Wymienne wieszaki



Wymienne akumulatory

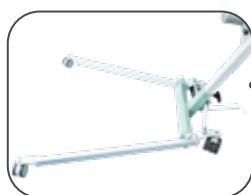

Regulowany rozstaw płóz (elektryczny lub manualny)



Możliwość elektrycznego rozstawu płóz za pomocą pilota



Najwyższej jakości kółka z wbudowanym hamulcem bezpieczeństwa







Dane techniczne

A – wysokość urządzenia	1300 mm
B – wysokość uchwytu	850 – 1170 mm
C ^P – zakres głębokości użytkowania (r. do podnoszenia)	590 mm
C ^I – zakres głębokości użytkowania (r. do pionizacji)	480 mm
E – długość podstawy	1190 mm
F – długość urządzenia	1510 mm
G – wysokość płóz	88 mm
H ^P – zakres podnoszenia (r. do podnoszenia)	795 – 2065 mm
H ^I – zakres podnoszenia (r. do pionizacji)	985 – 2060 mm
I – szerokość uchwytu	520 mm
J – szerokość urządzenia	630 mm
K – szerokość wewnętrznej powierzchni użytkowania	530 mm
L ^P – długość ramienia (r. do podnoszenia)	1060 mm
L ^I – długość ramienia (r. do pionizacji)	950 mm
M – przestrzeń wewnątrz r. do pionizacji	505 mm
N – szerokość platformy do pionizacji	360 mm
O – głębokość platformy do pionizacji	360 mm
P – wysokość podpory piszczei	385 mm/325 mm
R – zakres rozstawu płóz (mechaniczny/elektryczny)	620 – 1110/620 – 1220 mm
Ø D1 – średnica przedniego koła	75 mm
Ø D2 – średnica tylnego koła	100 mm
Całkowita masa (bez wieszaka, kamizelki)	38 – 39 kg
Max. obciążenie (oznaczone na tabliczce znamionowej podnośnika)	130/160/190 kg
Siła potrzebna do obsługi pilota	≤5N
Poziom hałas	≤44dB

Dane elektryczne

Ładowarka	Wejście: 100-240V AC, 50/60Hz Wyjście: 28.8V DC, 1500mA
Bateria	24V DC
Klasa szczelności skrzynka kontrolna	IP66
Klasa szczelności siłownika (górny/dolny)	IP66/IP54
Klasa szczelności pilota	IP66
Cykl pracy	10%max 2min ON/ 18min OFF
Praca pod obciążeniem (podnoszenie, opuszczanie)	60 cykli przy pełnym zakresie podnoszenia i obciążeniu 80 kg
Średni czas podnoszenia / opuszczania	38 s
Średni czas rozstawu płóz	~2 s

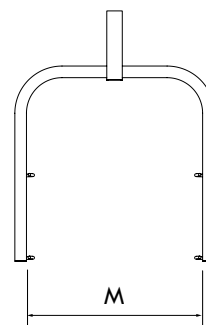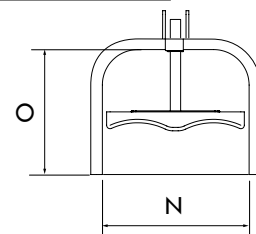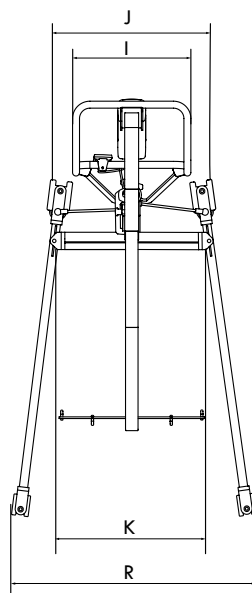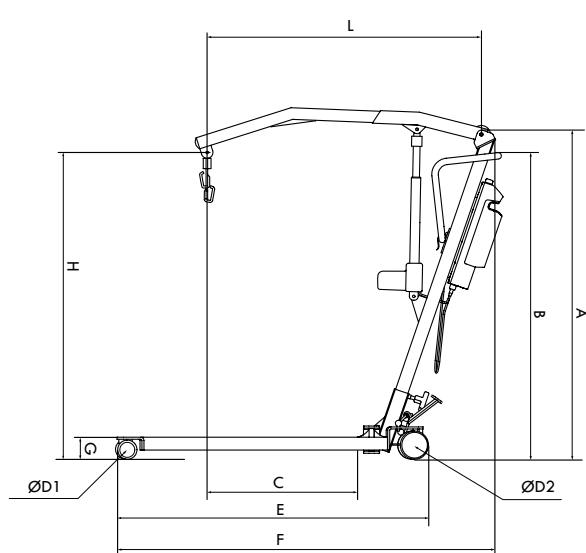



NOWE!

Podnośnik jezdny LeviCare J160 Mini




J160MINI-M/E

LeviCare J160 Mini posiada wszystkie zalety podnośników J130/160/190, ale różni się niewielkimi wymiarami urządzenia. Dedykowany użytkownikom posiadającym ograniczoną przestrzeń mieszkającą. Doskonale sprawdzi się w miejscach, gdzie ograniczona powierzchnia nie pozwala na swobodne manewrowanie podnośnikiem o standardowych gabarytach.



Zakres podnoszenia w porównaniu z LeviCare J130/160/190:

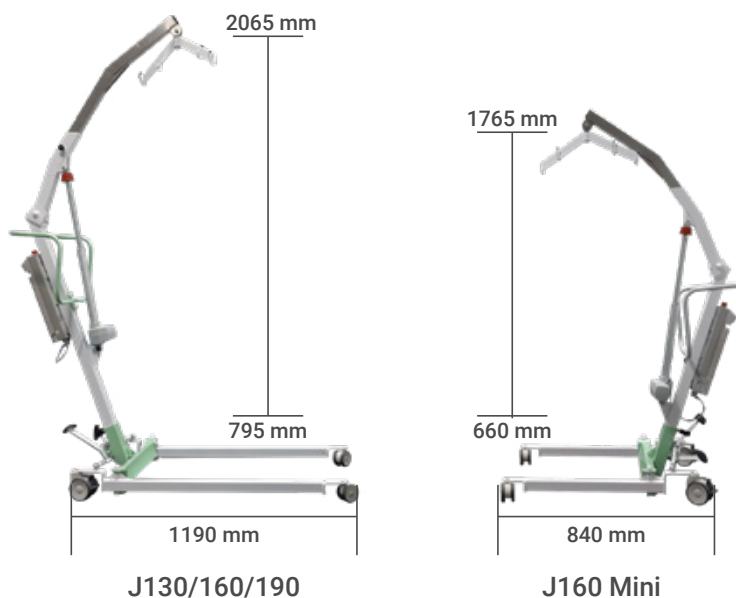


Możliwość elektrycznego rozstawu płóz za pomocą pilota



Sterowany za pomocą pilota lub panelu sterowania na skrzynce kontrolnej

Modułowa budowa podnośników Mini, ale także J130/160/190, pozwala w łatwy sposób przekształcić podnośnik w pionizator.

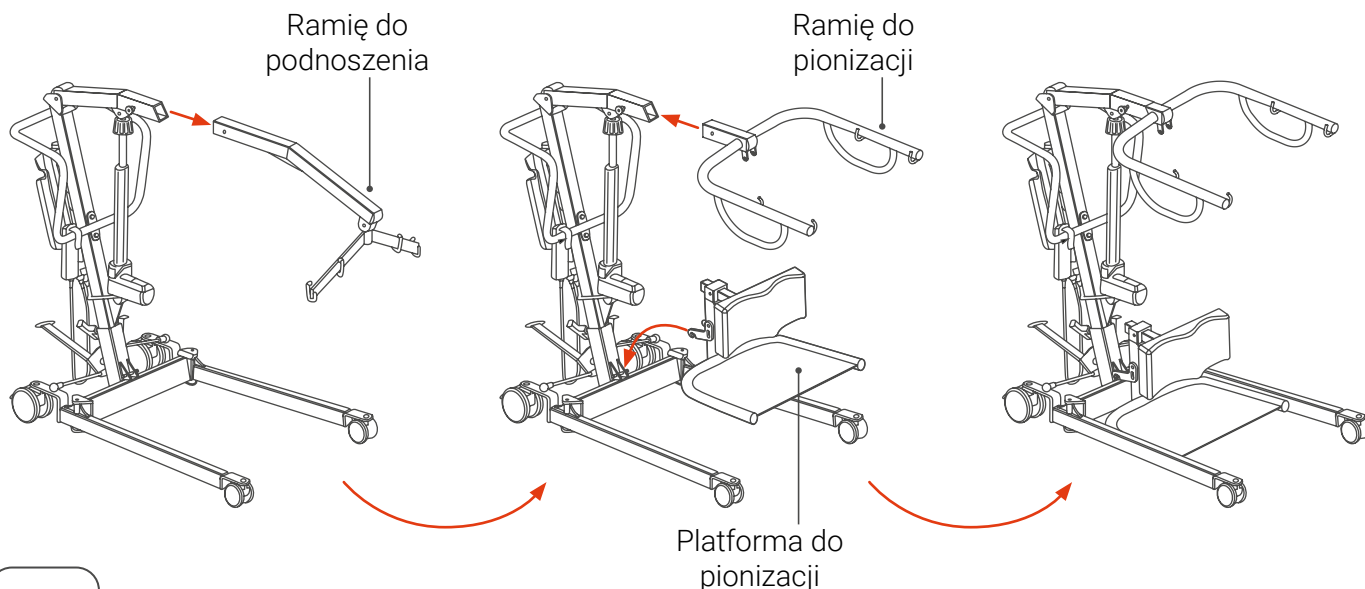



WYMIARY PODNOŚNIKA JEZDZEGO




A – wysokość urządzenia	1105 mm
B – wysokość uchwytu	990 mm
*C ^P – zakres głębokości użytkowania	505 mm
*C ^I – zakres głębokości użytkowania	570 mm
E – długość podstawy	840 mm
F – długość urządzenia	1080 mm
G – wysokość płóz	88 mm
*H ^P – zakres podnoszenia	660 – 1765 mm
*H ^I – zakres podnoszenia	790 – 1900
I – szerokość uchwytu	520 mm
J – szerokość urządzenia	630 mm
K – szerokość wewnętrznej powierzchni użytkowania	530 mm
*L ^P – długość ramienia w maszcie	915 mm
*L ^I – długość ramienia w maszcie	950 mm
M – przestrzeń wewnątrz r. do pionizacji	505 mm
N – szerokość platformy do pionizacji	360 mm
O – głębokość platformy do pionizacji	360 mm
P – wysokość podpory piszczele	385 mm, 325 mm
R – max rozstawu płóz (mechaniczny / elektryczny)	840 mm/920 mm
Ø D1 – średnica przedniego koła	75 mm
Ø D2 – średnica tylnego koła	100 mm
Całkowita masa (bez wieszaka, kamizelki)	35 – 36 kg
Max. Obciążenie	160 kg

DANE ELEKTRYCZNE

Ładowarka	Wejście: 100-240V AC, 50/60Hz Wyjście: 28.8V DC, 1500mA
Bateria	24V DC
Klasa szczelności skrzynka kontrolna	IP66
Klasa szczelności siłownika (górny/ dolny)	IP66/ IP54
Klasa szczelności pilota	IP54
Cykl pracy	10% max 2min ON/ 18min OFF
Praca pod obciążeniem (podnoszenie, opuszczanie)	60 cykli przy pełnym zakresie podnoszenia i obciążeniu 80 kg
Średni czas podnoszenia/ opuszczania	38 s
Średni czas rozstawu płóz	~2 s

C^P, L^P, H^P - wymiary dotyczące J160 Mini z ramieniem do podnoszenia.

C^I, L^I, H^I - wymiary dotyczące J160 Mini z ramieniem do pionizacji.

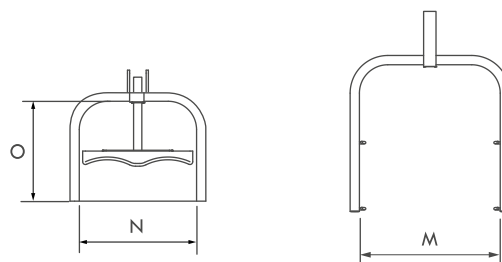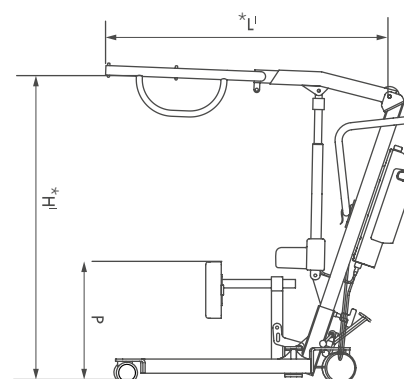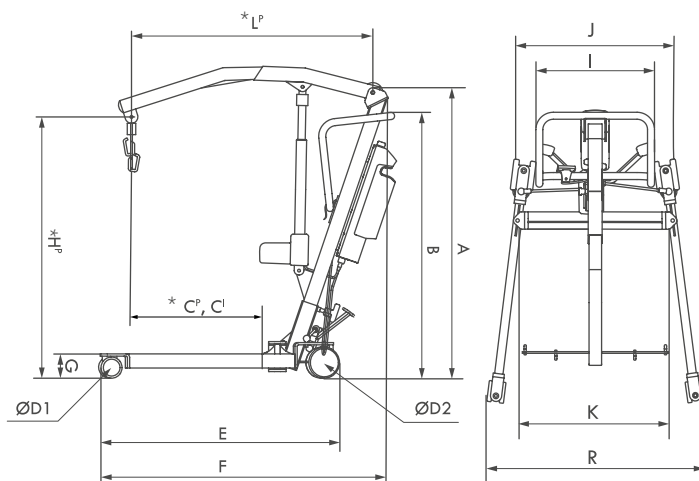



Akcesoria



Wieszak płaski

APLC-01

Standardowy wieszak płaski (czteropunktowy) do podnośnika umożliwia transfer osoby z niepełnosprawnością w pozycji siedzącej i półleżącej. Może być stosowany z każdym typem kamizelki poza 8-punktową.



Wieszak przestrzenny

APLC-02

Przestrzenny wieszak (czteropunktowy) zwiększa komfort i swobodę osoby podnoszonej, szczególnie osób z nadwagą. Umożliwia transfer w pozycji siedzącej lub półleżącej. Może być stosowany z każdym typem kamizelki. Dostępny w różnych wymiarach.



Wieszak ośmiopunktowy

APLC-03

Wieszak ośmiopunktowy pozwala na podnoszenie użytkownika wyłącznie w pozycji leżącej. Wymaga specjalnej kamizelki ośmiopunktowej do podnoszenia w pozycji leżącej.



Wieszak na wymiar

APLC-12

Wieszak z możliwością dopasowania do indywidualnych potrzeb użytkownika z uwzględnieniem określonego schorzenia. Do tego typu wieszaka niezbędne jest dokonanie pomiaru przez specjalistę oraz dokładne dopasowanie kamizelki.



Ramię i platforma do pionizacji

APLC-13

Zestaw można błyskawicznie zamontować w podnośniku uzyskując funkcję pionizacji osoby z niepełnosprawnością. (do zamontowania w podnośniku J130/160/190 lub J160 Mini)



Akumulator

APLC-15

Dodatkowa bateria, błyskawiczny demontaż/montaż.



Waga LeviCare

APLC-07

Urządzenie, które pozwala zważyć użytkownika w trakcie podnoszenia.



Stacja dokująca

APLC-14

Stacja dokująca pozwala na ładowanie akumulatora po odłączeniu go od podnośnika. Ma możliwość montażu do ściany. Doskonale sprawdzi się wraz z dodatkową baterią.


Dane techniczne

Masa (bez wieszaka i kamizelki)	38 kg
Maksymalny udźwig	150 kg
Prędkość podnoszenia (czas potrzebny na jedno maksymalne podniesienie)	40s
Moc podnoszenia i opuszczania	25W
Napięcie wejściowe	24V AC 50 Hz
Klasa ochronności	II
Stopień ochrony (klasa szczelności)	IP X4
Pełna tabela wymiarów na www.levicare.sklep.pl	

AKS Clino II

Wysoka prędkość podnoszenia

83012

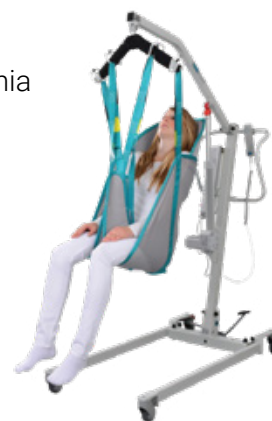

Dane techniczne

Masa (bez wieszaka i kamizelki)	53 kg
Maksymalny udźwig	250 kg
Prędkość podnoszenia (czas potrzebny na jedno maksymalne podniesienie)	78 s
Moc podnoszenia i opuszczania	40W
Napięcie wejściowe	24V AC 50 Hz
Klasa ochronności	II
Stopień ochrony (klasa szczelności)	IP X5
Pełna tabela wymiarów na www.levicare.sklep.pl	

AKS Goliath

Udźwig do 250kg

86031




Dane techniczne

Masa (bez wieszaka i kamizelki)	38 kg
Maksymalny udźwig	150 kg
Prędkość podnoszenia (czas potrzebny na jedno maksymalne podniesienie)	80 s
Moc podnoszenia i opuszczania	40W
Napięcie wejściowe	24V AC 50 Hz
Klasa ochronności	II
Stopień ochrony (klasa szczelności)	IP X4
Pełna tabela wymiarów na www.levicare.sklep.pl	

AKS Foldy

Wersje od Micro do XL

80011

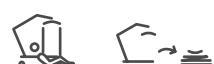

Dane techniczne

Masa (bez wieszaka i kamizelki)	39 kg
Maksymalny udźwig	150 kg
Prędkość podnoszenia (czas potrzebny na jedno maksymalne podniesienie)	80 s
Moc podnoszenia i opuszczania	40W
Napięcie wejściowe	24V AC 50 Hz
Klasa ochronności	II
Stopień ochrony (klasa szczelności)	IP X4
Pełna tabela wymiarów na www.levicare.sklep.pl	

AKS Dualo

Podnośnik i pionizator w jednym

87013 / 87010




Układy szyn

Rodzaje instalacji systemów sufitowych:


Jeden tor

Składa się z ciągu szyn prostych oraz zakrętów. Zapewnia możliwość przemieszczania się podnośnika po wyznaczonym przez szyny torze. Jeśli podnośnik ma transportować użytkownika pomiędzy pomieszczeniami, w niektórych przypadkach może być konieczna modyfikacja architektoniczna (np. wycięcie nadproży). Tego typu instalacja z zastosowaniem napędu do podnośnika może umożliwić osobie z niepełnosprawnością całkowitą niezależność w przemieszczaniu się.

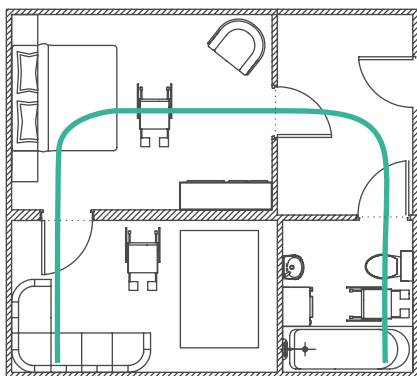


Room-to-Room

Dzięki systemowi Room-to-Room możliwy jest transport użytkownika między pomieszczeniami, bez konieczności dokonywania zmian architektonicznych. Niezależne systemy szyn w sąsiadujących pomieszczeniach współpracują, w tym przypadku z podnośnikiem wyposażonym w funkcję Room-to-Room (np. Heymer Duo). Funkcja ta pozwala na płynne przejście pomiędzy pomieszczeniami bez konieczności opuszczania podopiecznego na wózek. Do obsługi instalacji typu Room-to-room wymagany jest zawsze asystent do obsługi podnośnika.

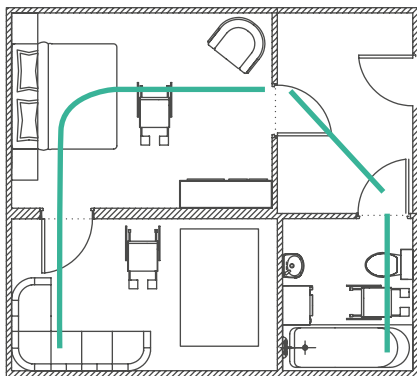


Przenośny podnośnik lub osobny podnośnik w każdym pomieszczeniu

W zależności od potrzeb i możliwości finansowych klienta, jeden podnośnik może być przenoszony pomiędzy układami szyn lub każdy układ szyn może być wyposażony w podnośnik.

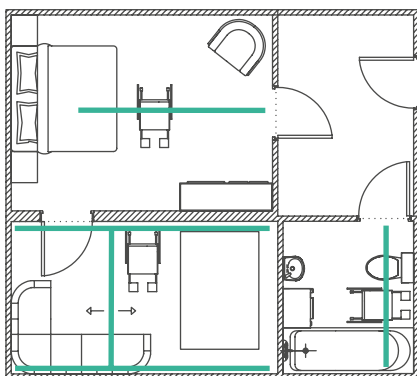



System trawersowy

System trawersowy zwany również systemem suwnicowym zapewnia największą dowolność w przemieszczaniu osoby podnoszonej. Każdy trawers składa się z trzech szyn: dwóch równoległych, zamontowanych do ścian lub sufitu oraz poprzecznej, poruszającej się po szynach równoległych. Podnośnik natomiast porusza się po szynie poprzecznej. System trawersowy nie narzuca toru ruchu, można poruszać się pomiędzy dowolnymi punktami w pomieszczeniu, które obejmuje trawers. System ten można stosować z dowolnym typem podnośnika sufitowego oraz możliwe jest łączenie pomieszczeń za pomocą specjalnego łącznika, czyli tzw. Gate'a.

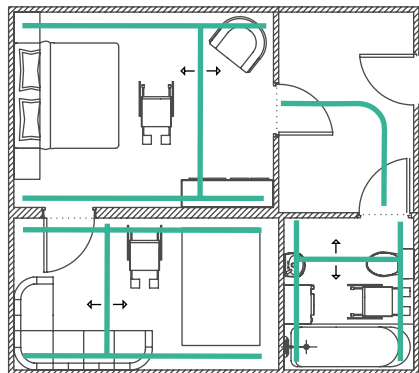

Zwrotnica i Gate


Elementy oszynowania, których zadaniem jest łączenie ze sobą różnych układów szyn w sposób, który zapewnia użytkownikowi przemieszczanie bez konieczności opuszczania podnośnika.

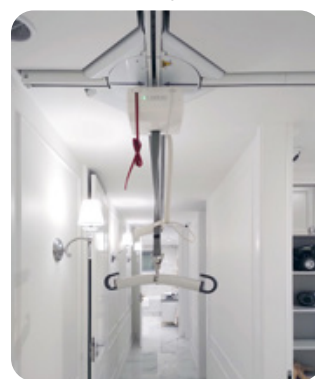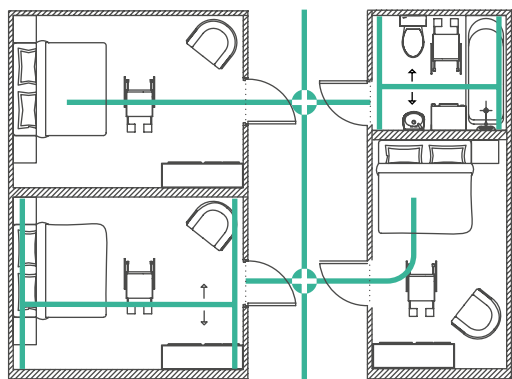

Zwrotnica

91884


Zwrotnica jest kompatybilna ze wszystkimi rodzajami podnośników sufitowych, zapewnia krótszy czas zmiany toru ruchu. Dostępne są dwie wersje urządzenia: elektryczna i manualna. Wersja elektryczna posiada osobne zasilanie, a obrót odbywa się automatycznie po przekroczeniu czujników krańcowych w szynach. Zwrotnica ma niewielkie gabaryty, dzięki temu jej montaż jest możliwy w bardzo ciasnych pomieszczeniach, np. łazienkach lub wąskich korytarzach.

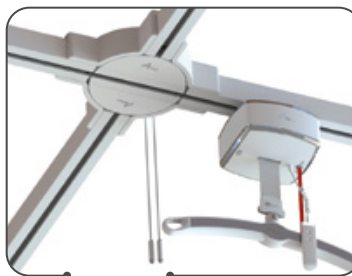

Gate

55721


System umożliwia bezpośredni przejazd z szyny prostej lub trawersu na trawers za pomocą każdego rodzaju podnośnika. Proces jest bardzo łatwy i nie wymaga używania siły bądź wykonywania dodatkowych czynności.

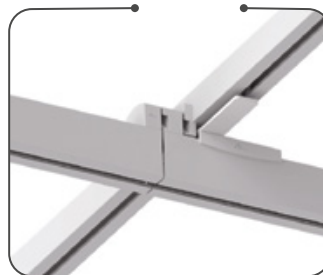


Elementy montażowe i akcesoria dodatkowe

Szyny LeviCare zostały wyprodukowane z najwyższej jakości materiałów, dzięki czemu zapewniają wysoką nośność, mając jednocześnie niewielką masę. Duża ilość akcesoriów montażowych pozwala na dopasowanie instalacji do dowolnej struktury budynku. Szyny można montować zarówno do ścian, jak i samego sufitu, a także do konstrukcji wolnostojących. Nasi specjaliści mają bogate doświadczenie w doborze układów oraz ilości elementów montażowych. Przemysłane akcesoria montażowe oraz doświadczenie pracowników firmy LeviCare gwarantują praktycznie nieograniczone możliwości w doborze układów szyn.


Rodzaje szyn LeviCare

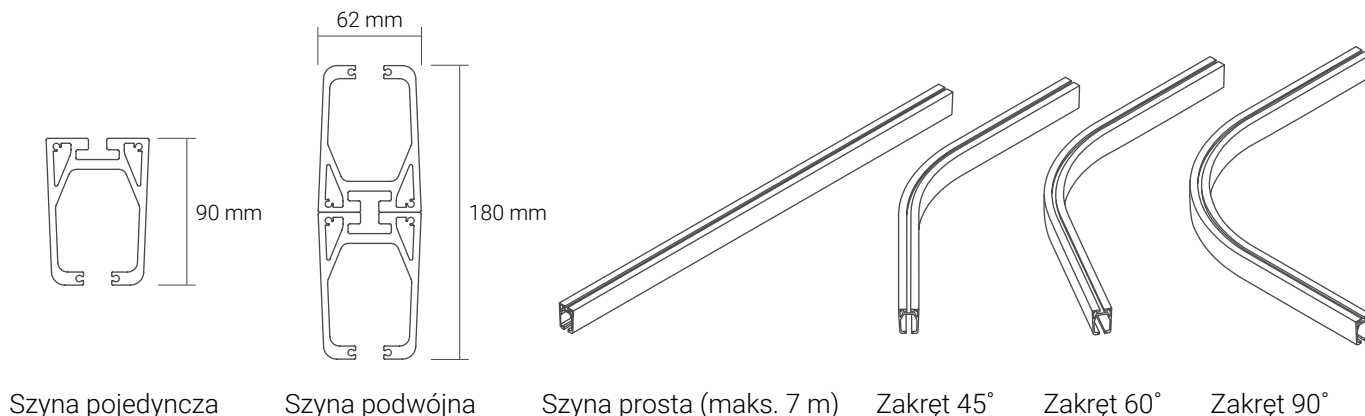


Mocowania szyn do ściany i sufitu

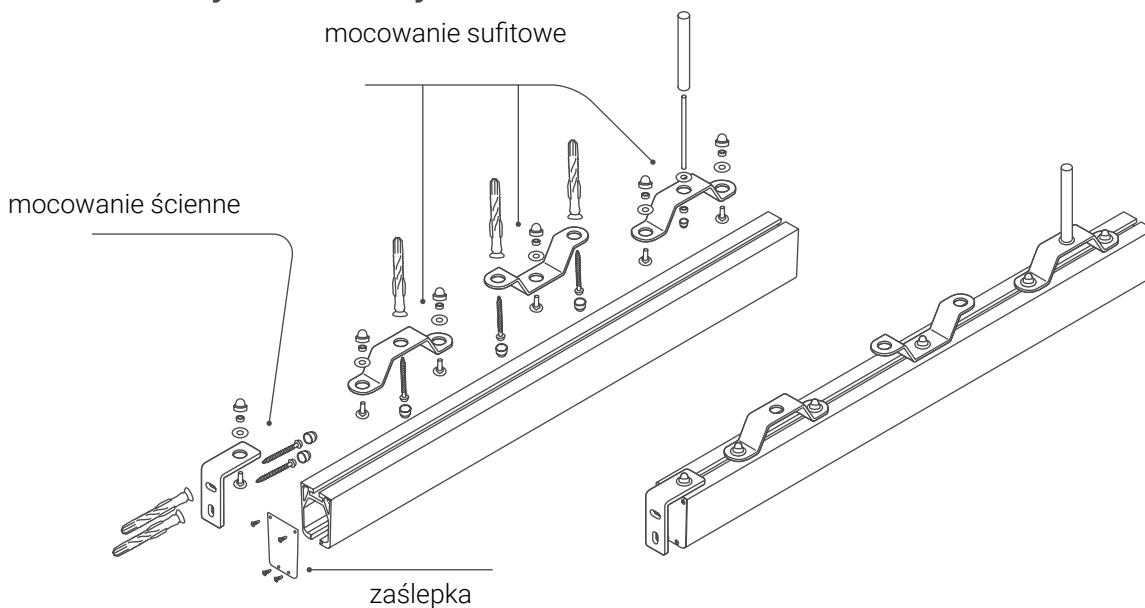


Trawers standardowy

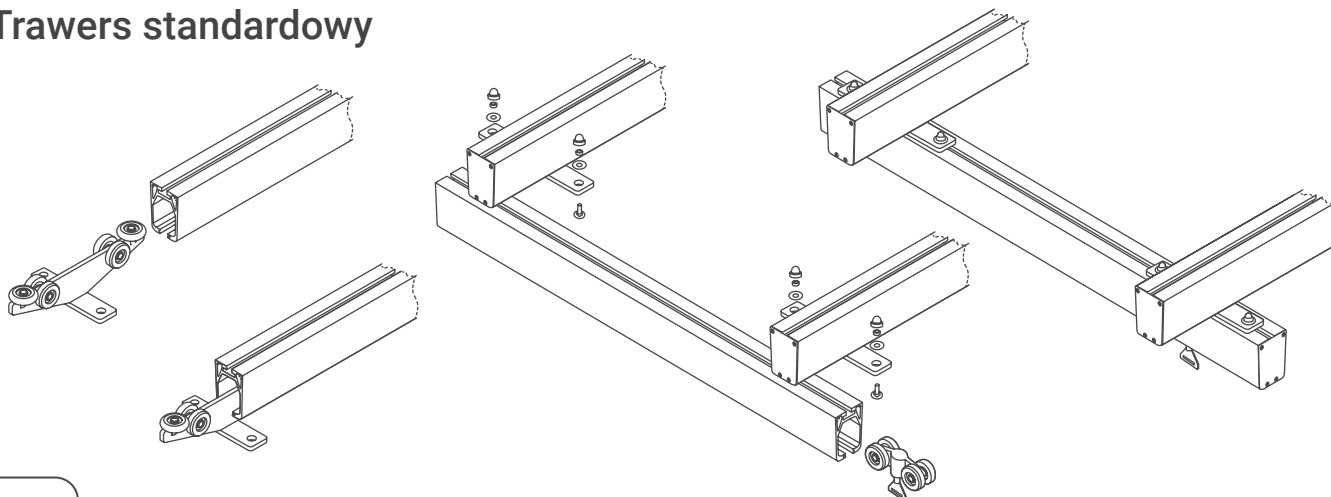


Trawers podwyższony

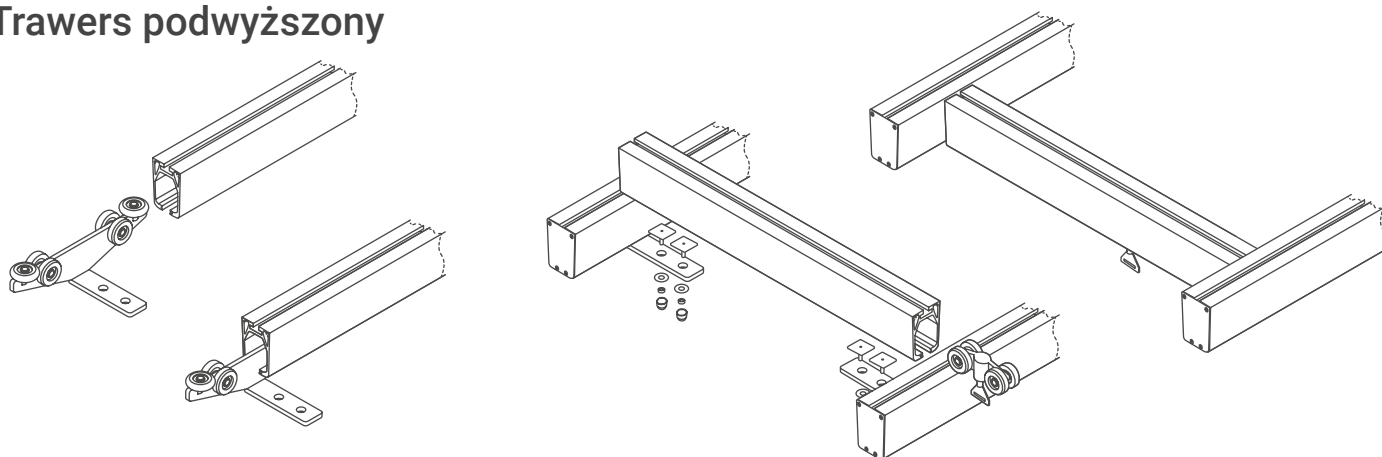


Szyna mocowana na słupkach (rozwiązanie stosowane do ścianek wykonanych z płyt karton-gips lub drewna)

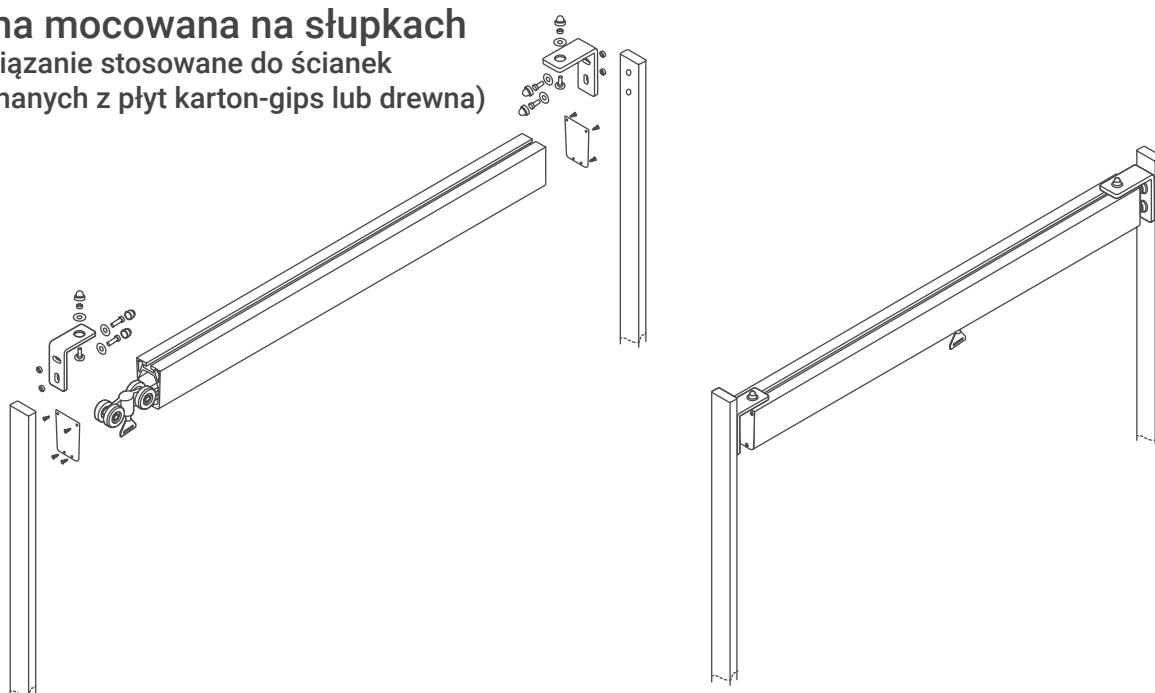


Przykładowe akcesoria

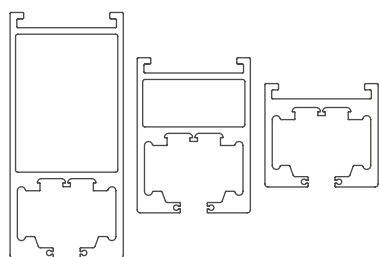


Pozostałe szyny dostępne w LeviCare

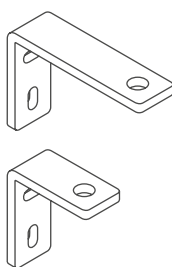


Mocowania ścienne

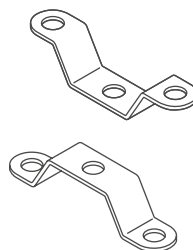


Mocowania sufitowe

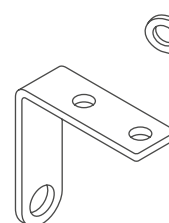


Uchwyt jednostronny SI

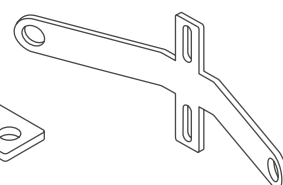


Uchwyt dwustronny SI

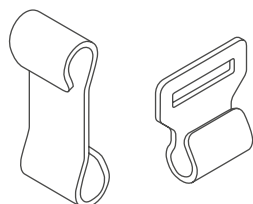


Klamry

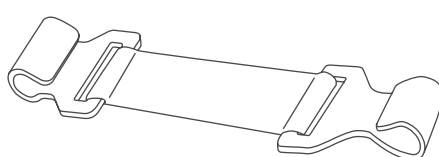


Pasek dystansowy
15,20,30,40,45,50,60,65,70,75,
80,90,100,110,120 cm

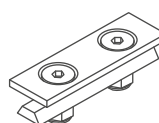


Łącznik szyn

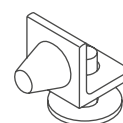


Zderzak

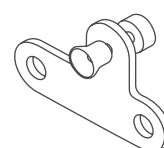


Blokada trawersu

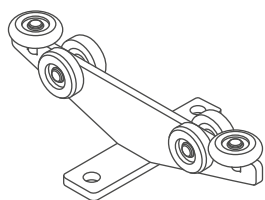


Wózek trawersowy standardowy

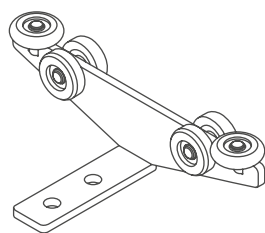


Wózek trawersowy podwyższony

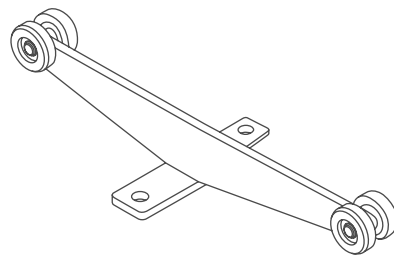


Wózek trawersowy o rozszerzonym rozstawie kółek

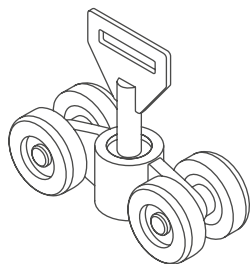



Wózek do podnośnika

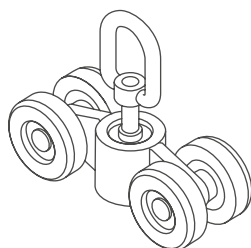

Wózek dedykowany GoLift Portable

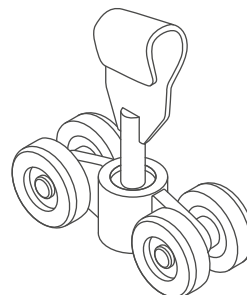

Wózek typu Hook

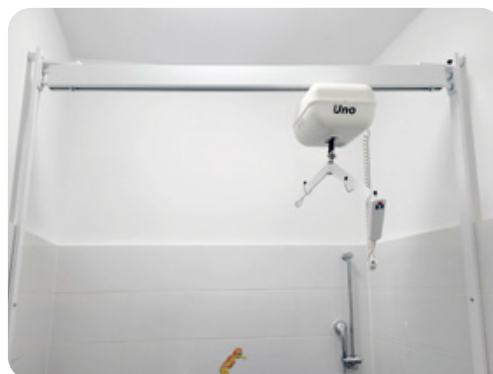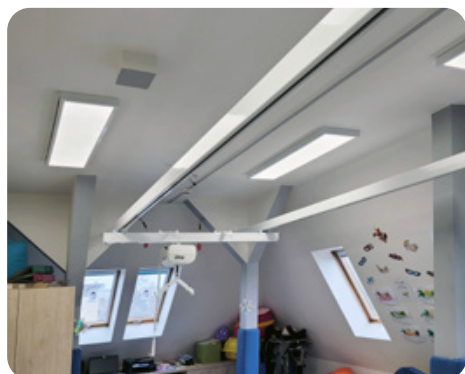


Podnośniki sufitowe

Główne zalety urządzenia:

- systemy sufitowe mogą w znacznym stopniu usamodzielnić użytkownika;
- opiekun lub asystent skupia swoją uwagę na osobie transferowanej, a nie na konstrukcji urządzenia;
- komfortowe, intuicyjne użytkowanie;
- nowoczesna, dyskretna konstrukcja niezajmująca przestrzeni użytkowej pomieszczenia;
- mała ingerencja w strukturę budynku;
- możliwość zamontowania podnośnika w prawie każdych warunkach architektonicznych;
- możliwość indywidualnego dopasowania systemu do potrzeb użytkownika;
- brak konieczności przemeblowania lub przebudowy pomieszczeń;
- możliwość transferu użytkownika pomiędzy pomieszczeniami bez konieczności opuszczania podnośnika.

Elementy systemu sufitowego:

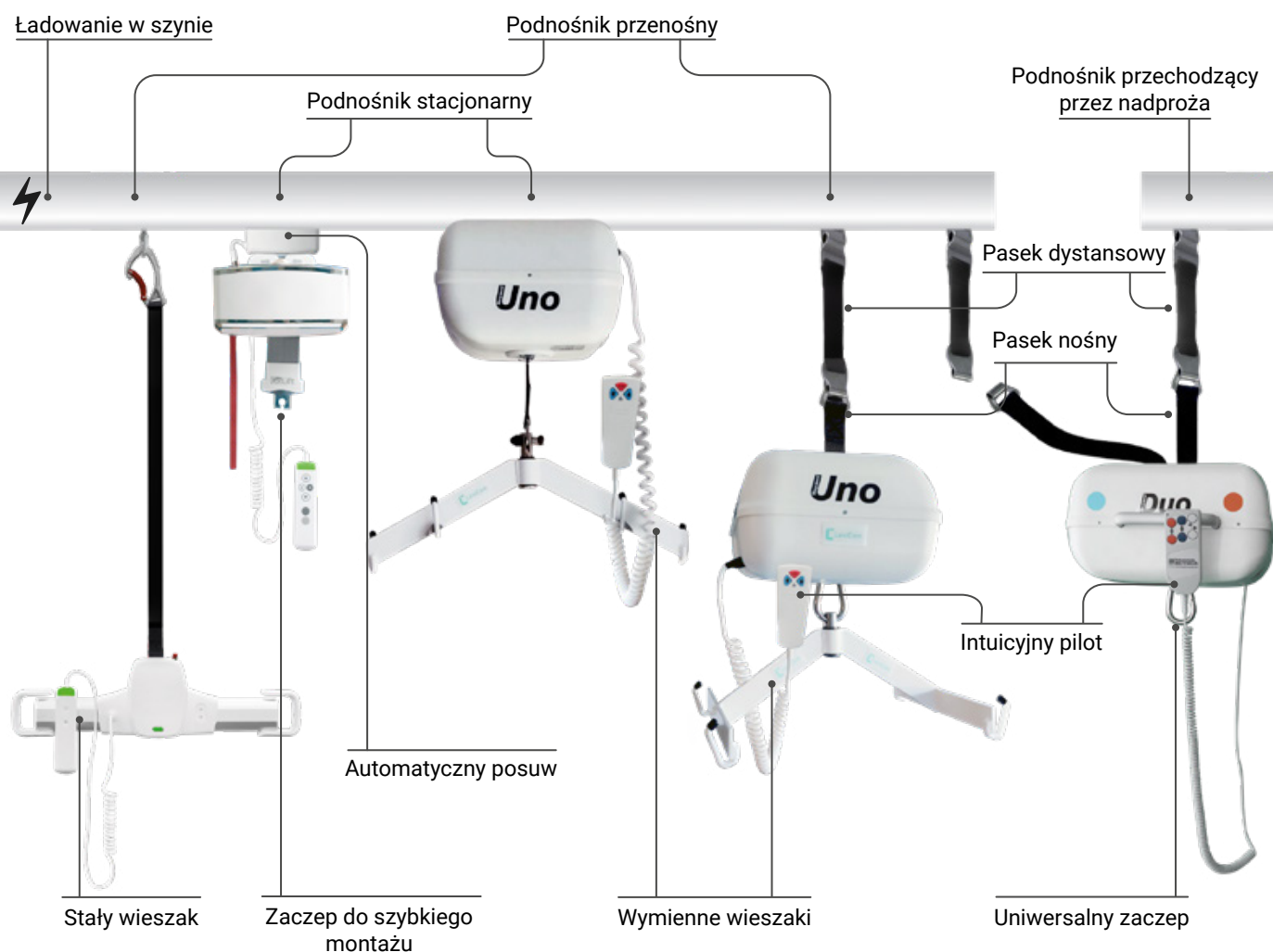

GoLift Portable 450

GO-LIFT-PORT-450-WR




Podnośnik sufitowy GoLift Portable 450 jest najmniejszym i najlżejszym podnośnikiem sufitowym na rynku. Dużą zaletą podnośnika Portable jest możliwość montażu urządzenia na szynach wszystkich producentów, może być dostosowany do różnych profili prowadnic. GoLift Portable został zaprojektowany, tak aby był wyjątkowo lekki, przenośny i estetyczny. Wykorzystuje najnowocześniejszą technologię w zakresie akumulatorów oraz mechanizmu kół zębatach.

Dane techniczne

Maksymalny udźwig	204 kg (450 lbs)
Masa	2,7 kg (6 lbs)
Długość paska nośnego	187,96 cm
Ilość podniesień na jednym ładowaniu	89 przy obciążeniu 68 kg (25% na pasku w średnim zakresie) 52 przy obciążeniu 204 kg (25% na pasku w średnim zakresie)
klasa szczelności podnośnika / klasa szczelności pilota	IP 23 / IPX4
Akumulator	Trwała bateria wodorkowo-niklowa (Ni-Mh) 1 x 24V (1.6Ah)
Ładowarka	100-240 V AC 40 Watt
Możliwości montażowe	+ Jeden tor - Room-to-Room + Przenośny podnośnik

Pełna tabela wymiarów na www.levicare.sklep.pl

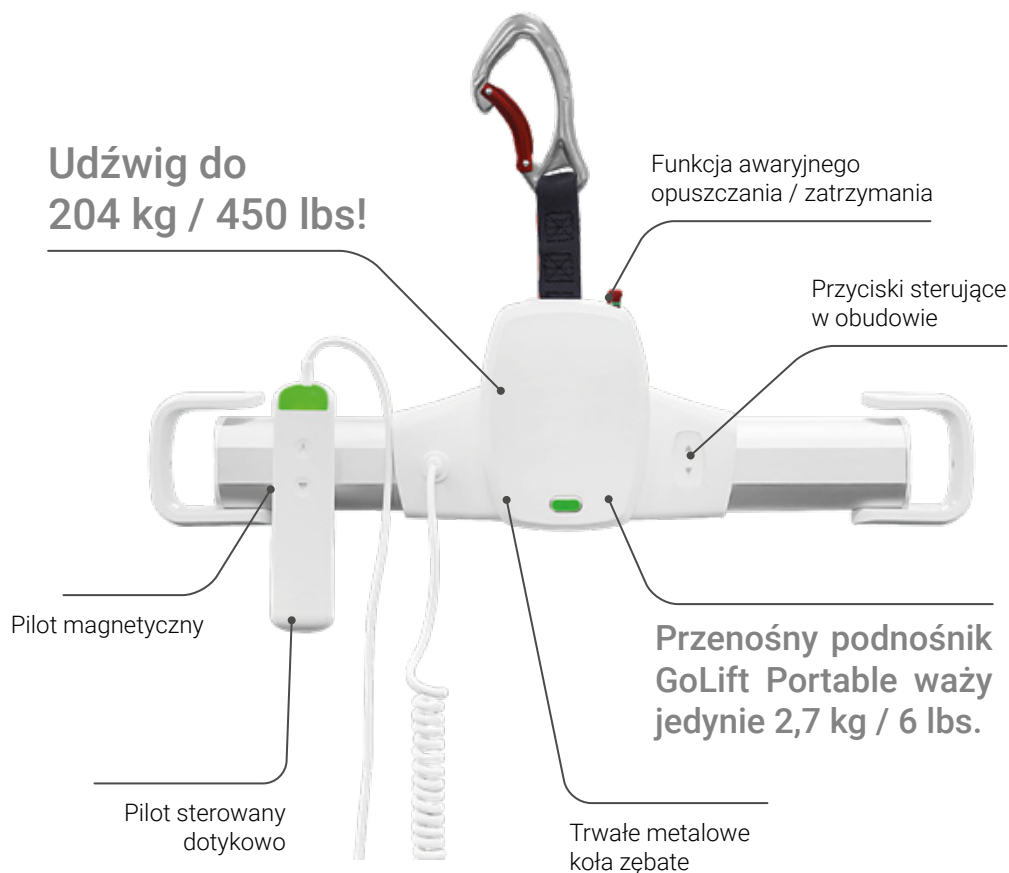


Waga 2,7 kg; udźwig aż 204 kg



Nowoczesny wygląd i estetyczne wykonanie



Bezpieczny transfer użytkownika

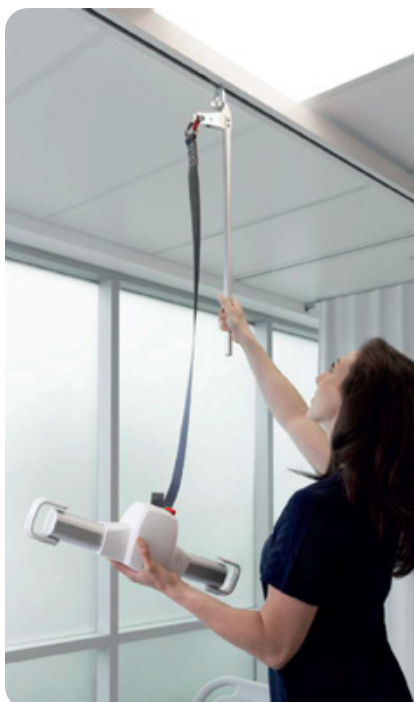

Drążek do zaczeplania/zdejmowania podnośnika



Intuicyjna obsługa



Podnośnik GoLift

GO-LIFT-400 lub GO-LIFT-700

Nowoczesny podnośnik wyprodukowany z najwyższej klasy materiałów. Wydajne akumulatory i mocny silnik pozwalają na maksymalny udźwig do 318 kg (453 kg przy użyciu dwóch podnośników).

- nowoczesna, dyskretna konstrukcja nie zajmująca przestrzeni użytkowej pomieszczenia;
- możliwość zamontowania podnośnika w niemal każdych warunkach architektonicznych;
- indywidualne dopasowanie systemu do potrzeb użytkownika;
- brak konieczności przemeblowania lub przebudowy pomieszczeń;
- możliwość błyskawicznego demontażu urządzenia bez użycia narzędzi

Dane techniczne

Udźwig	GoLift 181 kg	GoLift 317 kg	GoLift 453 kg
Masa	3,5 kg	4,5 kg	9 kg
Zakres podnoszenia	x	182 cm	200 cm
Ilość podniesień na jednym ładowaniu	25% na pasku w średnim zakresie: 375 przy obciążeniu 185 lbs / 84 kg 170 przy obciążeniu 400 lbs / 181 kg 102 przy obciążeniu 700 lbs / 318 kg		
Klasa szczelności pilota	IPX4		
Bateria	Ni-Mh 2x 14,4V (2Ah) opcjonalnie: 2x 14,4V (3.3Ah) lub (5 Ah)		
Ładowarka	100-240 VAC 40 Watt		
Możliwości montażowe	+ Jeden tor - Room-to-Room + Przenośny podnośnik		

Pełna tabela wymiarów na www.levicare.sklep.pl

**Udźwig do
181 kg lub 317 kg!**

Jasne wskaźniki LED

Pilot sterowany
dotykowo

Możliwość szybkiej
wymiany baterii

**Podnośnik GoLift waży
jedynie 4,5 kg / 10 lbs.**

Możliwość wymiany
wieszaków

Funkcja awaryjnego
opuszczania / zatrzymania



Łatwa dezynfekcja urządzenia



Pilot magnetyczny z dotykowymi przyciskami




Waga mniejsza niż 5 kg



Szybki montaż wieszaka



Trwały i wytrzymały

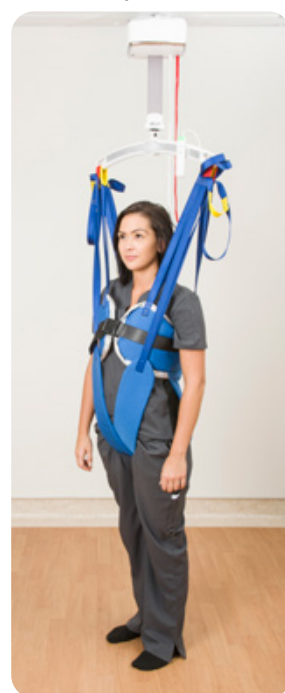

Heymer Uno Light

8504



Dane techniczne

Masa (bez wieszaka i kamizelki)	9,5 kg
Maksymalny udźwig	160 kg
Długość paska nośnego	1800 m
Akumulator	2x 12V/2,6Ah
Ładowarka	24V/0,5 A DC
Klasa ochrony	II
Stopień ochrony	IP X4
Możliwości montażowe	Jeden tor Room-to-Room Przenośny podnośnik

Pełna tabela wymiarów na www.levicare.sklep.pl



Podnośnik Uno Light to stacjonarny podnośnik sufitowy, który umożliwia transport osoby z niepełnosprawnością po dowolnych układach szyn. Szyny mogą być zamontowane w obrębie jednego pomieszczenia lub kilku, jeśli prowadnice są ze sobą połączone w sposób ciągły (bez przerw). Uno Light doskonale sprawdza się do reedukacji chodu lub pionizacji, a także w pomieszczeniach kąpielowych.

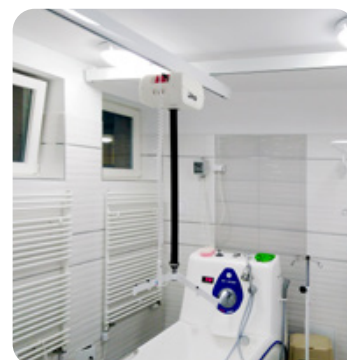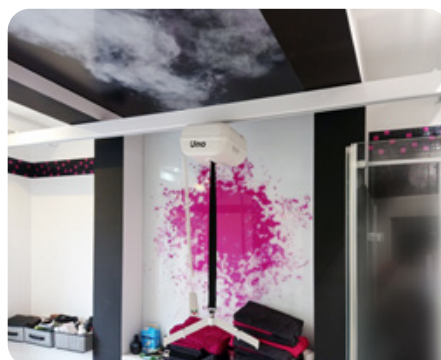

Heymer Uno

8502

Dane techniczne

Masa (bez wieszaka i kamizelki)	9,5 kg	
Maksymalny udźwig	160 kg	
Długość paska nośnego	1800 m	
Akumulator	2x 12V/2,6Ah	
Ładowarka	24V/0,5 A DC	
Klasa ochrony	II	
Stopień ochrony	IP X4	
Możliwości montażowe	Jeden tor	+
	Room-to-Room	-
	Przenośny podnośnik	+

Pełna tabela wymiarów na www.levicare.sklep.pl



Uno w konfiguracji stacjonarnej

Uno w konfiguracji przenośnej



Podnośnik Uno posiada wygodny uchwyt, dzięki któremu możliwe jest łatwe przenoszenie go pomiędzy niezależnymi szynami (np. w oddzielnych pomieszczeniach).

Podnośnik sufitowy to przenośny podnośnik, który opcjonalnie może być zamontowany jako typowy podnośnik stacjonarny. Rozbudowując system szyn można bardzo łatwo przekształcić podnośnik z wersji stacjonarnej w przenośną.



Heymer Duo

8501



Dane techniczne

Masa (bez wieszaka i kamizelki)	11 kg
Maksymalny udźwig	160/300 kg
Długość paska nośnego	1800 m
Akumulator	2x 12V/3Ah
Ładowarka	24V/0,5 A DC
Klasa ochrony	II
Stopień ochrony	IP X4
Możliwości montażowe	Jeden tor Room-to-Room Przenośny podnośnik
Pełna tabela wymiarów na www.levicare.sklep.pl	

Podnośnik Duo to jedyne na świecie rozwiązanie, które posiada dwa niezależne od siebie silniki z pasami nośnymi. Duo umożliwiają płynne przejście urządzenia z użytkownikiem w podwieszeniu na drugi układ szyn.

Dzięki funkcji Room-to-Room nie zachodzi konieczność przesadzania użytkownika na wózek podczas transferu. Jest to najprostszy w obsłudze podnośnik tego typu na rynku.



Funkcja Room-to-Room



Należy dosunąć podnośnik do nadproża...



...zaczepić wolny pasek nośny na szynie w sąsiadującym pomieszczeniu...



... Nacisnąć przycisk na pilocie, aby użytkownik płynnie przeszedł do kolejnego pomieszczenia...



...na koniec odczepić drugi, nieaktywny już, pasek nośny i przesunąć podnośnik po kolejnym odcinku szyn.



Akcesoria



Wieszak płaski

APLC-01

Standardowy wieszak płaski (czteropunktowy) do podnośnika. Może być stosowany z każdym typem kamizelki.



Wieszak przestrzenny

APLC-02

Przestrzenny wieszak (czteropunktowy). Może być stosowany z każdym typem kamizelki. Dostępny w różnych wymiarach.



Wieszak ośmiopunktowy

APLC-03

Wieszak ośmiopunktowy pozwala na podnoszenie użytkownika wyłącznie w pozycji leżącej. Wymaga specjalnej kamizelki ośmiopunktowej.



Automatyczny posuw

8507

Pozwala użytkownikowi na samodzielną obsługę podnośnika.



Waga LeviCare

APLC-07

Urządzenie umożliwiające ważenie użytkownika w trakcie podnoszenia.



Wieszak na wymiar

APLC-12

Wieszak z możliwością dopasowania do indywidualnych potrzeb użytkownika z uwzględnieniem określonego schorzenia. Do tego typu wieszaka niezbędne jest dokonanie pomiaru przez specjalistę oraz dokładne dopasowanie kamizelki.



Wieszak LeviTrainer

O-CZ-LA

Wieszak wraz z gumami do pionizacji stanowi doskonałe uzupełnienie systemu sufitowego, zwłaszcza dla osób aktywnych.



LeviActive

PKLC-A

LeviActive jako akcesorium do podnośnika sufitowego stanowi doskonały dodatek i uzupełnienie dla osób planujących wykonywanie ćwiczeń w odciążeniu.



Uchwyty do SI

SI-U-2

Specjalne uchwyty do szyny, które pozwolą na podwieszenie dowolnego akcesorium, dzięki czemu szyna zamieni się w system do ćwiczeń SI.



NOWE!

Reedukacja chodu, pionizacja i fizjoterapia




Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych

do 95% dofinansowania

LeviActive - System do Ćwiczeń i Rehabilitacji

PKLC-A


LeviActive to wielofunkcyjny system do rehabilitacji i ćwiczeń, zamocowany do ściany, przeznaczony do użytku domowego oraz w placówkach rehabilitacyjnych. LeviActive wraz z akcesoriami daje możliwość wykonywania szeregu ćwiczeń, pionizacji i reedukacji chodu. Cały system jest skonstruowany w taki sposób, by pozwalał na wykonywanie ruchu wielopłaszczyznowego – co niezbędne jest w prowadzeniu ćwiczeń funkcjonalnych. Umożliwia także ćwiczenia z pozycji siedzącej, bez konieczności opuszczania wózka, dzięki akcesoriom, które są zaprojektowane modułowo i łatwo dostępne.

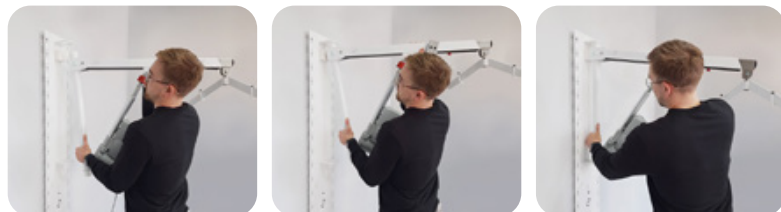

Wieszak LeviTrainer:




1. Obrótowy sworzeń wieszaka
2. Otwory mocowania gum do kamizelki LeviKam Trainer
3. Miejsca na podłączenie uchwytów do ćwiczeń
4. Karabińczyki
5. Blokada obrotu
6. Gumy do podwieszania

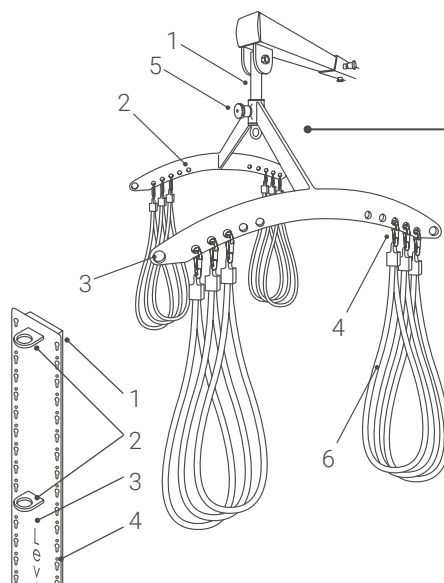


Baza ścienna LeviActive:

1. Mocowanie do ściany
2. Mocowanie do podnośnika LeviCare Q140
3. Ścianka do mocowania akcesoriów LeviActive
4. Otwory do zaczepiania akcesoriów do ćwiczeń

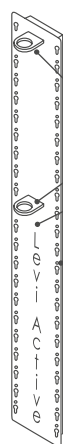

Kamizelka LeviKam Trainer:

1. Elastyczny pas tułowia
2. Klamry pasa tułowia
3. Klamry taśm nożnych
4. Taśmy nożne
5. Taśmy nożne opasujące
6. Uchwyty do gum napinających i innych akcesoriów
7. Podparcie pod pachy
8. Siedzisko LeviSeat

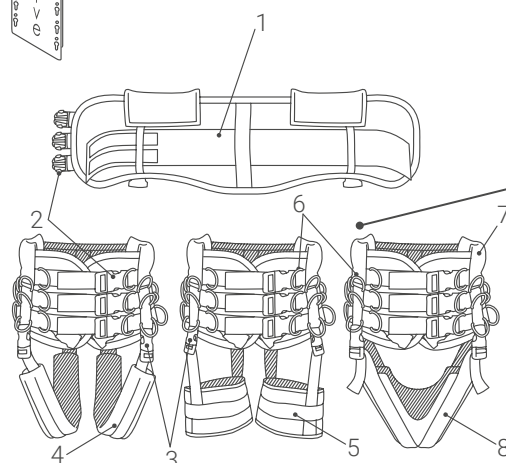


LeviKam Trainer

LAT-S/M/L/XL

Kamizelka LeviKam Trainer została stworzona, aby zapewnić użytkownikowi pełną stabilizację tułowia oraz bezpieczeństwo podczas ćwiczeń lub rehabilitacji. Miękkie wypełnienie kamizelki w miejscach największego obciążenia, gwarantuje pełen komfort użytkowania, bez nieprzyjemnego ucisku lub otarć w okolicach pach oraz ud. Materiał zastosowany w produkcji kamizelki, umożliwia cyrkulację powietrza, nie powodując odparzenia ciała. Dzięki wykorzystaniu wytrzymałych klamer i regulowanych pasów, LeviKam Trainer jest łatwa w obsłudze i pasuje do każdej budowy ciała.

Kamizelka może być połączona z wieszakiem za pomocą gum lub pasów. Ilość gum determinuje stopień odciążenia pacjenta a możliwość zmiany odciążenia, może przyczynić się do postępu w procesie rehabilitacji.



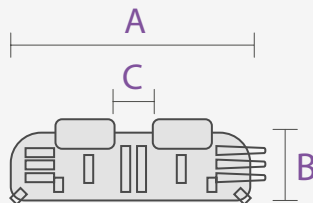


for gait re-education		XXS size	XS size	S size	M size	L size	XL size	XXL size
	A dimension	60	80	90	100	110	120	130
	B dimension	20	26	26	26	26	26	26
	C dimension	-*	16	22	24	26	28	30

*Pianka znajduje się na całej szerokości kamizelki



Akcesoria LeviActive

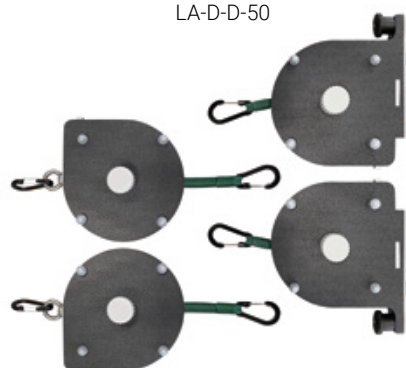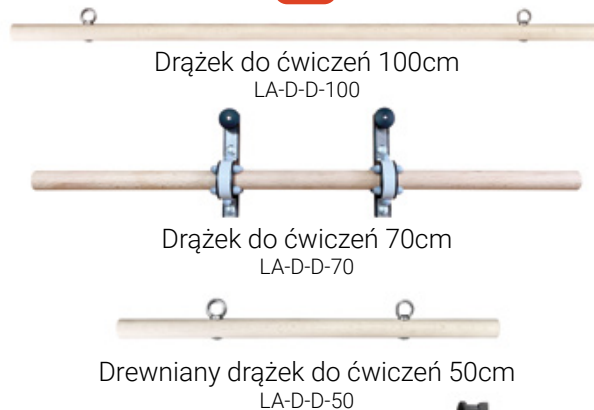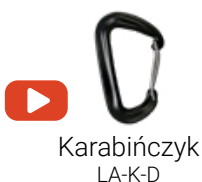

Zawiera 4x Taśmy do sztywnego podwieszenia



Zestaw: Ramię poprzeczne dla podnośnika Q140
5LA



Platforma pod wózek z uchwytem
LA-PL-W



Rękawice rehabilitacyjne
LA-RR



Podwieszka do podwieszenia
kończyn M, L
LA-P-K-M



Podwieszka do
podwieszenia bioder
LA-P-T



Podwieszka do
podwieszenia tułowia



Uchwyt na głowę
LA-UG





Podpięcie kończyn
LA-ZP-M-XL



Drażek odsunięty (balkonik)
LA-D-O-N

Akcesoria LeviActive w użyciu



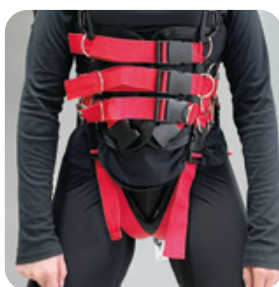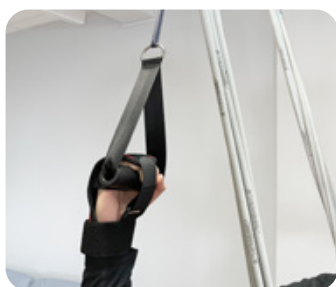

Realizacje





Przykładowe ćwiczenie z LeviActive

Reedukacja chodu



Ćwiczenia z oporem



Ćwiczenia różnych partii ciała



Pionizacja przy wsparciu bariery

Ćwiczenia funkcjonalne

Ćwiczenia z oporem za pomocą bloczka



Pionizator i podnośnik jezdny LeviCare J160 Mini


J160MINI-M/E

Podnośnik LeviCare J160 Mini jest najmniejszym na rynku podnośnikiem jezdnym, dedykowany użytkownikom posiadającym niewielką przestrzeń mieszkaldną. Doskonale sprawdzi się w miejscach, w których ograniczona powierzchnia nie pozwala na swobodne manewrowanie podnośnikiem o standardowych gabarytach.


Strona 14



Zakres podnoszenia w porównaniu z LeviCare J130/160/190:

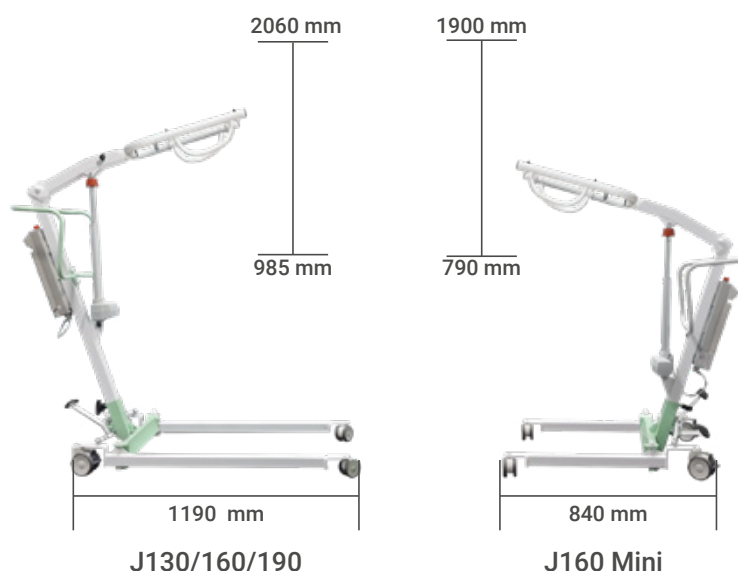

Modułowa budowa podnośnika Mini, pozwala w łatwy sposób przekształcić podnośnik w pionizator.

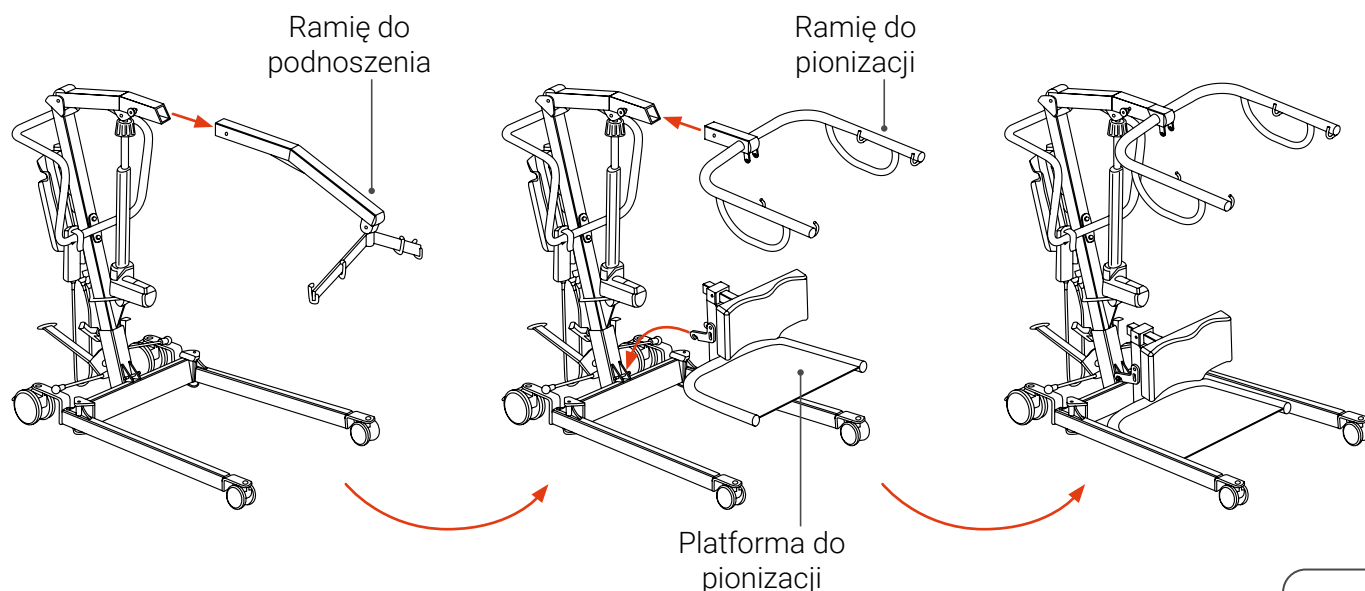



LeviKam do reedukacji chodu

LRC- M-1

Kamizelka LeviKam do reedukacji chodu została zaprojektowana do wspomagania użytkownika podczas trenowania chodzenia. Miętko wykończone brzegi w okolicach dołów pachowych oraz pachwin zmniejszają ryzyko odczuwania dyskomfortu.

Reedukacja Chodu		XS rozmiar	S rozmiar	M rozmiar	L rozmiar	XL rozmiar
	A wymiar	90	100	106	112	118
	B wymiar	30	30	30	30	30



Pionizatory



Heymer StehFix 2301

Masa (bez wieszaka i kamizelki)	25 kg
Maksymalny udźwig:	130 kg
Prędkość podnoszenia (czas potrzebny na jedno maksymalne podniesienie)	40s
Moc podnoszenia i opuszczania	25W
Napięcie wejściowe	24V AC 50 Hz
Klasa ochrony	II
Typ ochrony	IP X4
Pełna tabela wymiarów na www.levicare.sklep.pl	

AKS Torneo II 82112

Masa (bez wieszaka i kamizelki)	44 kg
Maksymalny udźwig:	150 kg
Prędkość podnoszenia (czas potrzebny na jedno maksymalne podniesienie)	40s
Moc podnoszenia i opuszczania	40W
Napięcie wejściowe	24V AC 50 Hz
Klasa ochrony	II
Typ ochrony	IP X4
Pełna tabela wymiarów na www.levicare.sklep.pl	

AKS Dualo 87013 / 87010

Masa (bez wieszaka i kamizelki)	39,3 kg
Maksymalny udźwig:	150 kg
Prędkość podnoszenia (czas potrzebny na jedno maksymalne podniesienie)	80s
Moc podnoszenia i opuszczania	40W
Napięcie wejściowe	24V AC 50 Hz
Klasa ochrony	II
Typ ochrony	IP X4
Pełna tabela wymiarów na www.levicare.sklep.pl	

Kamizelki i siedziska

Kamizelki LeviKam

- maksymalne obciążenie do 200 kg;
- możliwość wyboru siedziska ze wsparciem głowy;
- kilkustopniowa regulacja zaczepów kamizelki;
- szeroka gama dostępnych rozmiarów;
- wielorodzików kamizelek: transportowe, kąpielowe, higieniczno-toaletowe, pionizujące, przeznaczone dla osób po amputacji, przystosowane do ponoszenia w pozycji leżącej;
- kamizelki wyposażone w wycięcie fizjologiczne, które ułatwiają czynności toaletowe i higieniczne;
- siedziska dostępne są w dwóch wersjach: kąpielowej (wykonane z siatki poliestrowej) oraz komfortowej (wykonane z lekkiego materiału poliestrowego).



Elementy kamizelki do podnośnika:



Opcja podparcia głowy i usztywnienie pleców



Zaczepek do regulacji pozycji użytkownika



Opcja z podparciem ramion



Specjalistyczny materiał: siatka kąpielowa, lity poliester



Uchwyt manewrowy



Siedziska dostępne w wielu rozmiarach



Wycięcie fizjologiczne



Możliwość wypełnienia z pianki PE



Zastosowanie kamizelek:

Kamizelki do podnośników dla osób z niepełnosprawnością w zależności od rodzaju i zastosowanego materiału dzielą się na:



Kamizelki kąpielowe



Kamizelki transportowe



Kamizelki higieniczno-toaletowe



Kamizelki do pionizacji

Pozycje podnoszenia

Indywidualne potrzeby użytkownika determinują określone ułożenie ciała oraz sposób podnoszenia za pomocą podnośnika. Odpowiednio dopasowane siedzisko i wieszak pozwalają na bezpieczny transfer w komfortowej pozycji.



Pozycja siedząca



Pozycja półleżąca





Pozycja leżąca




Zakładanie kamizelek



Zakładanie w pozycji siedzącej:

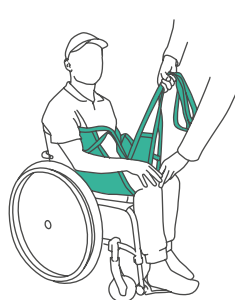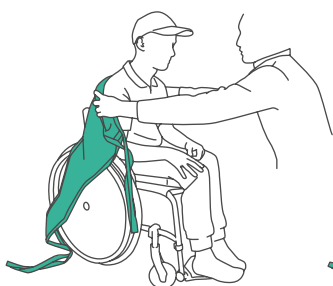


Zakładanie w pozycji leżącej:

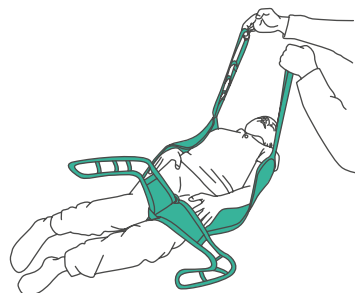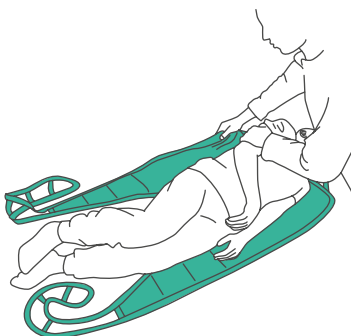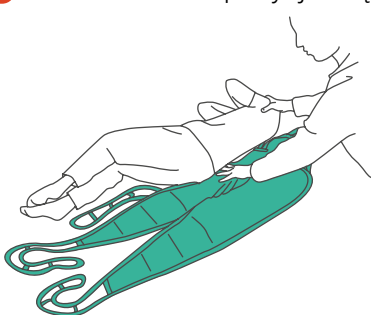

LeviKam Standard

LST-M-1

Kamizelka LeviKam Standard umożliwia transfer użytkownika w pozycji siedzącej, zapewniając odpowiednie podparcie pleców. System regulacji pasków zaczepowych oraz uchwyt manewrowy ułatwiają dopasowanie zgodne z indywidualnymi potrzebami oraz bezpieczne manewry obracania użytkownika w podwieszeniu.

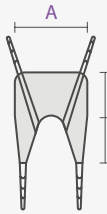
Standard		XS	S	M	L	XL
		rozmiar	rozmiar	rozmiar	rozmiar	rozmiar
	A	66	79	90	1011	10
	B	50	52	58	58	60
	C	49	49	52	70	88



LeviKam +

LPL-M-1

Siedzisko LeviKam + dedykowane jest osobom wymagającym stałego podparcia głowy. Kamizelka posiada także specjalne kieszenie na listwy usztywniające, które zapewniają stabilizację pleców użytkownika. Dzięki siedzisku LeviKam + możliwy jest transfer użytkownika w pozycji siedzącej oraz półleżącej.

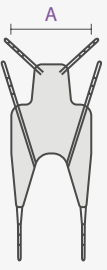Plus		XS	S	M	L	XL
		rozmiar	rozmiar	rozmiar	rozmiar	rozmiar
	A	66	79	90	101	115
	B	33	37	44	46	49
	C	50	55	58	58	60
	D	49	49	52	70	90



LeviKam Active

LAC-M-1

Kamizelka higieniczno-toaletowa LeviKam Active przeznaczona do czynności higieniczno-toaletowych, posiada wygodne wycięcie fizjologiczne zapewniające swobodny dostęp do miejsc intymnych użytkownika. Zapewnia komfortowy transfer w pozycji siedzącej. Kamizelka posiada podparcie pod ramionami, co umożliwia pionizację osoby z niepełnosprawnością.

Active		XS	S	M	L	XL
		rozmiar	rozmiar	rozmiar	rozmiar	rozmiar
	A	82	84	93	1051	22
	B	91	92	94	98	115






LeviKam Active Full Back

LACFB-M-1

Kamizelka LeviKam Active Full Back jest rozwinięciem siedziska LeviKam Active dla osób wymagających dodatkowego podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa.

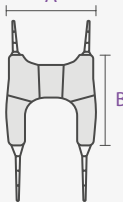
	Active Full Back	XS rozmiar	S rozmiar	M rozmiar	L rozmiar	XL rozmiar
	A wymiar	82	84	93	105	122
	B wymiar	91	92	94	98	115



LeviKam Active z podparciem głowy

LACPL-M-1

Siedzisko LeviKam Active z podparciem głowy dedykowane jest osobom wymagającym podparcia głowy. Kamizelka została wyposażona w pas stabilizujący tułów użytkownika. Powstała z wytrzymałego i nie chłonnego wody materiału, dzięki temu sprawdza się doskonale podczas codziennych czynności higieniczno-toaletowych. Dodatkową zaletą kamizelki LeviKam Active jest fakt, iż po jej założeniu materiał zakrywa niewielką powierzchnię ciała, co w znacznym stopniu ułatwia kąpiel oraz korzystanie z toalety.

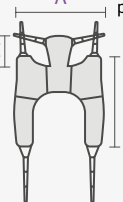
	Active z podparciem głowy	XS rozmiar	S rozmiar	M rozmiar	L rozmiar	XL rozmiar
	A wymiar	82	84	93	105	122
	B wymiar	91	92	94	98	115
	C wymiar	30	31	37	40	42



LeviKam Amputee

LAM-M-1

Siedzisko LeviKam Amputee charakteryzuje się przemyślanym kształtem oraz wysoką jakością wykonania. Umożliwia transfer w pozycji siedzącej, zapewniając odpowiednie podparcie pleców. Zapewnia bezpieczeństwo i komfort użytkownikom po przebytej amputacji kończyn dolnych.

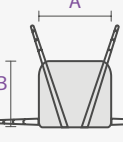	Amputee	M rozmiar	L rozmiar
	A wymiar	90	101
	B wymiar	94	96



LeviKam 8-pkt

L8-U-1

Kamizelka LeviKam 8-punktowa przeznaczona jest dla użytkowników wymagających transferu jedynie w pozycji leżącej, dedykowana do wykonywania codziennych czynności higieniczno-pielęgnacyjnych. Siedzisko jest kompatybilne z wieszakiem 8-punktowym.

	8-punktowa	UNI rozmiar
	A wymiar	100
	B wymiar	171



LeviKam do reedukacji chodu

LRC- M-1

Kamizelka LeviKam do reedukacji chodu została zaprojektowana do wspomagania użytkownika podczas trenowania chodzenia. Miętko wykończone brzegi w okolicach dołów pachowych oraz pachwin zmniejszają ryzyko odczuwania dyskomfortu.

	Reedukacja Chodu	XS rozmiar	S rozmiar	M rozmiar	L rozmiar	XL rozmiar
	A wymiar	90	100	106	112	118
	B wymiar	30	30	30	30	30



LeviKam na zamówienie

Firma LeviCare jest świadoma różnorodnych potrzeb klientów, wiemy, że mogą się różnić, a nawet mocno odbiegać od standardowo dostępnych rozwiązań. W związku z tym za dodatkową opłatą oferujemy możliwość adaptacji kamizelki do indywidualnych potrzeb. Doświadczeni Specjaliści LeviCare pomogą w dopasowaniu parametrów oraz wyglądu kamizelki na zamówienie.



NOWE!



NOWE!

LeviKam - kolor do wyboru



Rozszerzyliśmy możliwość indywidualnego dopasowania sprzętu do potrzeb, uwzględniając wygląd otoczenia oraz gust użytkownika, oferujemy za dodatkową opłatą możliwość wyboru koloru kamizelek. Zmiana koloru obejmuje zarówno pasy, jak i materiał, z którego uszyte jest siedzisko.

Siedzisko Butler

1580

Siedzisko Butler jest innowacyjnym uchwytem do podnośników, charakteryzującym się sposobem zakładania, zdejmowania oraz podtrzymywania osoby z niepełnosprawnością.



Temblak TTG

KMBU-02

Kamizelka TTG to innowacyjne rozwiązanie, które ma za zadanie ułatwić oraz usprawnić pionizowanie użytkownika np. w celu reedukacji chodu. Jej konstrukcja pozwala na założenie kamizelki w mniej niż minutę - wystarczy wsunąć ręce w specjalne rękawy i zapiąć kamizelkę wygodnym zaczepem umieszczonym na plecach.






Adaptacja samochodu - transfer osób

Smart Transfer

T-MPL150

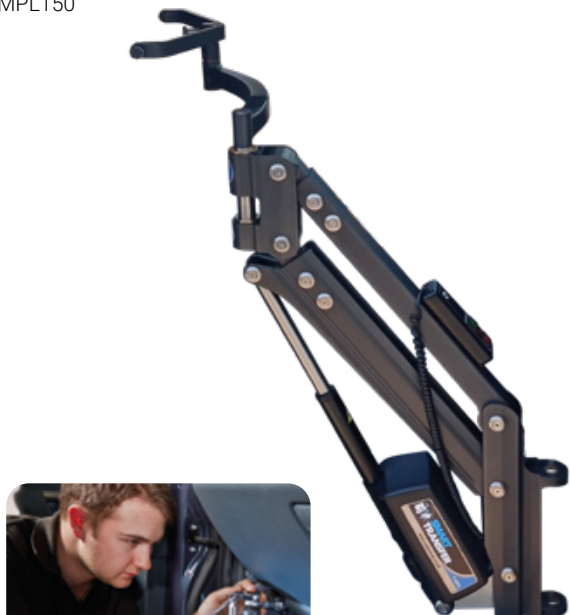

Dane techniczne

Masa podnośnika:	8.5kg
Maksymalny udźwig:	150kg
Zasilanie:	12V dc
Maksymalny pobór prądu:	20 A
Materiały produkcyjne:	Aluminium i stal nierdzewna
Sposób wykończenia	Malowane proszkowo
Kamizelki	Standardowa – XS, S, M, L, XL Po amputacji kończyn – S, M, L
Materiał kamizelki:	Poliester

- pasuje do 95% samochodów;
- montaż możliwy zarówno przy fotelu kierowcy, jak również przy przednim i tylnym fotelu pasażera;
- intuicyjny sposób użytkowania;
- łatwe przeniesienie urządzenia do nowego pojazdu;
- szelki dostępne w rozmiarach od XS do XL.





Handylift

SPGH EVO



Dane techniczne

Masa podnośnika:	9,5 kg
Maksymalny udźwig:	90kg / 120kg
Zasilanie:	12V dc
Maksymalny pobór prądu:	20 A
Materiały produkcyjne:	Aluminium i stal nierdzewna
Sposób wykończenia	Malowane proszkowo
Kamizelki	S, M, L
Materiał kamizelki:	Poliester

- możliwość instalacji w każdym pojeździe;
- dostępne zastosowanie przenośnego, demontowalnego wspornika zawiasowego;
- w zestawie torba dedykowana do przechowywania podnośnika;
- ergonomiczne, łatwe do czyszczenia siedzisko w trzech rozmiary (S - M - L);
- udźwig → 120 kg (90 kg ze wspornikiem zawiasowym);
- pilot Wi-Fi i ręczny system awaryjny;
- oświetlenie ledowe.





Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych

do 95% dofinansowania

Adaptacja samochodu - transfer wózków

Help V

winda boczna

PEH5

- udźwig do 200 kg;
- możliwość zastosowania w wielu różnych modelach samochodów;
- niewielka waga urządzenia;
- kompaktowa budowa;
- odporność na korozję;
- sterowanie za pomocą pilota;
- zminimalizowane zapotrzebowanie na energię.




Smart Lifter LM/LC/LP

Podnośnik do wózków i skuterów

PKAC-03 / PKAC-04 / PKAC-02

Zalety podnośnika do wózków i skuterów Smart Lifter:

- prosty w obsłudze;
- podnosi wszystkie typy elektrycznych wózków i skuterów inwalidzkich;
- solidna konstrukcja, intuicyjna obsługa;
- ponad 300 dedykowanych zestawów montażowych do różnych modeli samochodów;
- łatwy w montażu w kolejnym samochodzie.

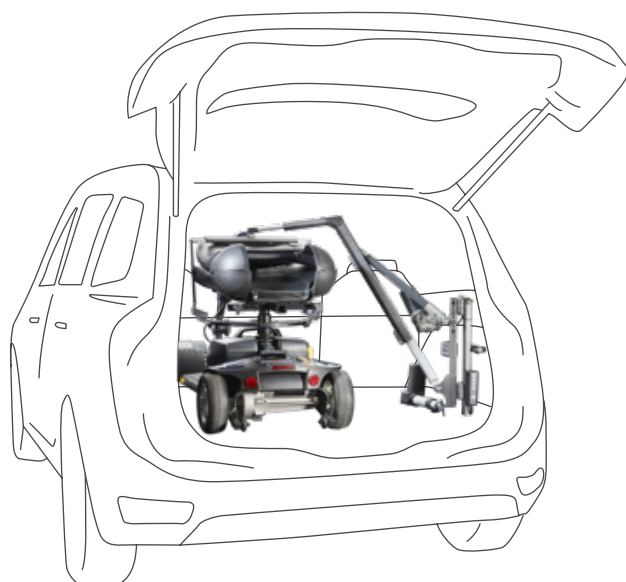

Podnośnik **Smart Lifter LM** jest dostępny w czterech wersjach:

- jednoosiowy z udźwigiem do 40 kg
- jednoosiowy z udźwigiem do 80 kg
- dwuosiowy z udźwigiem do 40 kg
- dwuosiowy z udźwigiem do 80 kg

Podnośnik **Smart Lifter LC** jest dostępny w dwóch wersjach:

- do 80 kg
- do 100 kg

Smart Lifter LP jest dostępny w trzech wersjach:

- do 125 kg
- do 150 kg
- do 200 kg





NOWE!

Rozwiązania stosowane na schody



Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych

do 95% dofinansowania

Prostoliniowe krzeselka schodowe Handicare

KS-SCH-HC-2

Krzeselka prostoliniowe to podstawowy typ, przeznaczony do schodów bez łuków i zakrętów. Dzięki różnorodnym modelom oraz funkcjom sprostają odmiennym potrzebom naszych użytkowników.

Oferujemy dwa rodzaje krzesełek prostoliniowych:



1000



1100



Handicare 1000 można wyposażyć w *automatyczny obrót** i *elektrycznie składany podnóżek**. Posiada dwa punkty przeznaczone do postoju umożliwiające ładowanie akumulatorów u góry i u dołu schodów. Prowadnicę można wyposażyć w *składaną szynę**, aby nie blokowała dołu schodów.

Handicare 1100 można umieścić blisko ściany, pozostawiając w ten sposób więcej wolnej przestrzeni na klatce schodowej. Handicare 1100 jest cichy i łatwy w użytkowaniu. Standardowo posiada funkcję ciągłego ładowania, która gwarantuje zawsze naładowane akumulatory niezależnie od tego, gdzie zaparkowano krzeselko.

Opcje dla krzesełek prostoliniowych



Szyna jezdna *




Składana szyna *



Elektr. składany
podnóżek *





Automatyczny
obróć *

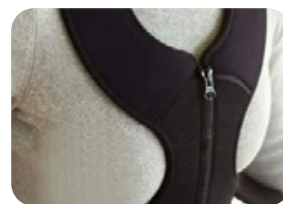

Uprząż *

* Elementy dodatkowe, dostępne na życzenie klienta i za dodatkową opłatą.

Dotychczasowe realizacje

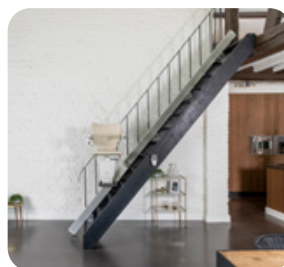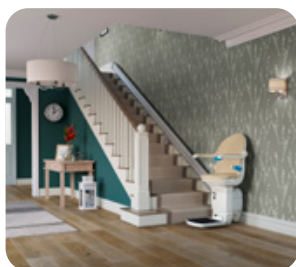

Krzywoliniowe krzeselka schodowe Handicare

KS-SCH-HC-1

Krzeselka krzywoliniowe to najlepszy wybór dla schodów zakręcających, z półpiętrzem lub łukiem po drodze.

Oferujemy dwa rodzaje krzesełek krzywoliniowych:



Freecurve
z szyną pojedynczą



2000
z szyną podwójną




NOWE!


Handicare Freecurve gwarantuje możliwość dostosowania stylu oraz dopasowania do potrzeb dodatków, takich jak np. *aktywne siedzisko**. *Aktywne siedzisko** działa podobnie jak podnośnik ułatwiający wstawanie, gdzie siedzisko delikatnie wspomaga użytkownika podczas siadania i wstawania z krzeselka.

Handicare 2000 charakteryzują najciaśniejsze łuki torów, dzięki którym pasuje do większości rodzajów schodów. System ściśle przylega do ściany, można w nim zastosować *składaną szynę**, która podnosi się, gdy nie jest używana.

Opcje dla krzesełek krzywoliniowych

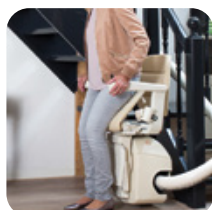

Aktywne Siedzisko *

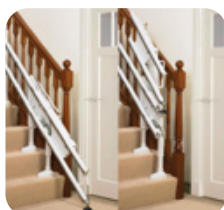


Składana Szyna *



Elektr. składany
podnóżek *



Automatyczny
obróć *

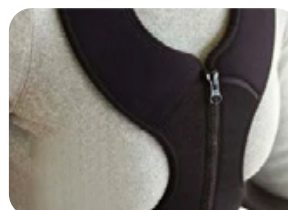



Uprząż *



Turn & Go+ *

* Elementy dodatkowe, dostępne na życzenie klienta i za dodatkową opłatą.

Dotychczasowe realizacje

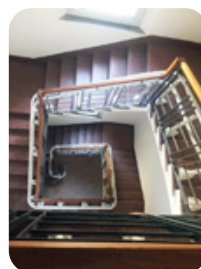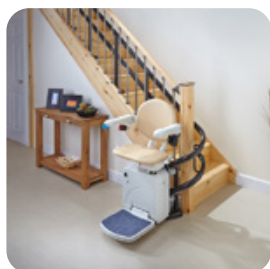

Krzesła toaletowo - kąpielowe HMN


 Państwowy Fundusz
 Rehabilitacji Osób
 Niepełnosprawnych
do 95% dofinansowania



M2 Standard z uchwytyami

310035-B



M2 Standard z ramą

310034-B



Krzesła toaletowo-kąpielowe M2 są znane z wysokiej jakości, ponieważ zostały stworzone z najlepszych materiałów. Gwarantujemy szeroki wybór rodzajów krzeseł oraz akcesoriów ułatwiających dopasowanie urządzenia do indywidualnych potrzeb użytkownika.



M2 Multi-Tip

310800



M2 Gas-Tip

310201-B



Nielsen Line Standard

313031



Multi-Tip z możliwością elektrycznej regulacji wysokości oraz opcją odchylenia siedziska. Intuicyjna obsługa za pomocą odpowiedniego przycisku pilota umożliwia regulację ustawień krzesła zgodnie z indywidualnymi potrzebami użytkownika.

Gas-Tip posiada sprężynę gazową, która wspomaga użytkownika oraz asystenta podczas zmiany pochylenia krzesła. System ułatwia powrót krzesła do pozycji pionowej, dzięki temu obsługa urządzenia wraz z użytkownikiem z nadwagą nie stanowi trudności.

Nielsen Line w wersji standardowej dostępne jest z siedziskiem o wyprofilowanym otworze tak, aby ułatwiać utrzymanie higieny. Wersja standardowa wyposażona jest także w regulowane podnóżki z możliwością ustawienia ich wysokości oraz kąta nachylenia, podłokietniki pokryte są materiałem antypoślizgowym.

Akcesoria



Podłokietniki

Prosty demontaż, możliwość regulacji wysokości i szerokości, łatwe składanie.



Oparcia

Możliwość wyboru odpowiedniego materiału oparcia dopasowanego do indywidualnych potrzeb np. piankowe lub z siatki przepuszczającej wodę.



Zagłówki

Duży wybór zagłówków z możliwością regulacji wysokości, szerokości, a nawet głębokości oparcia głowy.



Siedzisko

Szeroka gama siedzisk z różnorodnie wyprofilowanym otworem higienicznym oraz możliwość wyboru siedziska z klapą.



Podnóżki

Różne wymiary podnóżków umożliwiają dopasowanie ich do potrzeb użytkownika.



Podpory

Duży wybór podpór np. podpory tułowia, łydki, podparcie jednej kończyny, a także zabezpieczające bok pacjenta.



Ochrona przed upadkiem

Pas biodrowy lub barierka montowana na podłokietnikach chroni użytkownika przed upadkiem z fotela.



Koła

Istnieje opcja wyboru kółek z hamulcem oraz możliwość zamontowania 24-calowych kół umożliwiających poruszanie się bez pomocy asystenta.



Akcesoria toaletowe

Deska toaletowa ułatwiająca uzyskanie najlepszej, bezpiecznej pozycji podczas korzystania z toalety, w zestawie lejki, osłonki, a także pojemniki toaletowe z pokrywami.



Łóżka


Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
do 95% dofinansowania

AKS L4 / L5



Łóżko

3544115 / 3544114 / 3544145 / 3544144

Łóżko AKS L4 zapewnia łatwą obsługę. Dwie poziome powierzchnie do wyboru (metalowe lub drewniane paski sprężynowe) z drewnianymi bocznymi szynami. Wysoka jakość i funkcjonalność pozwala bezpiecznie korzystać z urządzenia użytkownikom oraz asystentom: wydajny zasilacz impulsowy SMPS 29V, wyprodukowany zgodnie z europejską normą EN 60601-2-52: 2010.

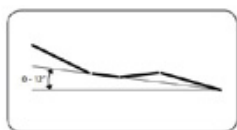

Łóżko posiada możliwość regulacji zapewniającej leżącemu na plecach użytkownikowi umiejscowienie głowy, górnej części klatki piersiowej oraz tułowia powyżej poziomu kończyn dolnych. Regulacja ta odbywa się w zakresie do 12 stopni.

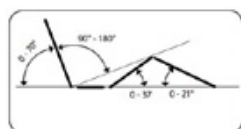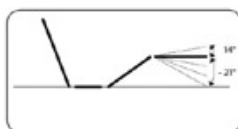

Powierzchnia leżąca łóżka jest regulowana elektrycznie za pomocą pilota.



Dane techniczne

Powierzchnia łóżka	90 x 200 cm
Wymiary całkowite	104,5 x 219 cm
Regulacja wysokości bez materaca	40 do 80 cm
Maksymalna waga pacjenta	150 kg
Napięcie wejściowe	zmiennie (100-240 V)





Modele L4 oraz L5 różnią się ułożeniem łydek podczas unoszenia kończyn.

AKS S4

Łóżko rehabilitacyjne

3524019

Łóżko rehabilitacyjne może być przeznaczone do użytku ambulatoryjnego zgodnie z normą EN 60601-2-52: 2010. Stabilne łóżko nożycowe AKS-S4 z 4-częściową leżącą powierzchnią przeznaczone jest do pielęgnacji domowej, zwłaszcza w przypadku wymagań dotyczących domowego wyglądu urządzenia. Wyposażony w powiększony podnośnik nożycowy, opatentowaną regulację stopy z kolanem i zasilaczem impulsowym SMPS 29V, doskonale spełnia wszelkie wymogi bezpieczeństwa.

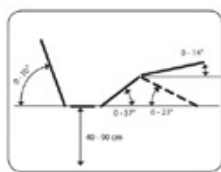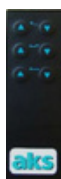

Powierzchnia leżąca łóżka jest regulowana elektrycznie za pomocą pilota.



Dane techniczne

Powierzchnia łóżka	90 x 200 cm
Wymiary całkowite	108 x 206 cm
Regulacja wysokości bez materaca	~40 do 90 cm
Maksymalna waga pacjenta	135 kg
Napięcie wejściowe	zmiennie (100-240 V)





AKS D4

Łóżko z niskim progiem

3554101 / 3554100

Coraz więcej osób potrzebuje opieki i wysokiego poziomu bezpieczeństwa przed wypadnięciem z łóżka z powodu swojej choroby, takiej jak demencja czy choroba Alzheimera. Niska wysokość wejścia do łóżka, wynosząca zaledwie 22 cm, znacznie wpływa na profilaktykę upadku, dzięki temu nie zachodzi konieczność używania środków ograniczających wolność użytkownika. Dodatkowo można zastosować matę zabezpieczającą przed upadkiem, którą umieszcza się przed łóżkiem, zmniejsza ona ryzyko ewentualnych obrażeń. Mata jest również dostępna w naszej ofercie.

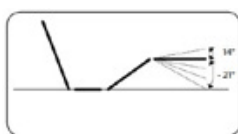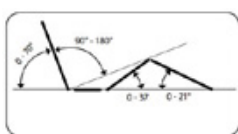


Powierzchnia leżąca łóżka jest regulowana elektrycznie za pomocą pilota.



Dane techniczne

Powierzchnia łóżka	90 x 200 cm
Wymiary całkowite	109 x 215 cm
Regulacja wysokości bez materaca	22 do 62 cm
Maksymalna waga pacjenta	150 kg
Napięcie wejściowe	zmienne (100-240 V)

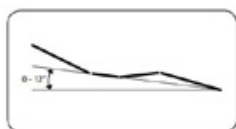

Łóżko posiada możliwość regulacji zapewniającej leżącemu na plecach użytkownikowi umiejscowienie głowy, górnej części klatki piersiowej oraz tułowia powyżej poziomu kończyn dolnych. Regulacja ta odbywa się w zakresie do 12 stopni.




AKS B4 compact

Rama do łóżek

3534112

Rama B4 Compact jest produktem przeznaczonym do instalacji w momencie, w którym mamy już bazę łóżka w domu i chcemy powiększyć zestaw o elektryczny podnośnik, aby przekształcić go w łóżko spełniające warunki niezbędne do sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością.

- Możliwość zintegrowania urządzenia ze standardowymi ramami łóżek;
- bezpieczne użytkowanie dzięki nowoczesnemu zasilaczowi impulsowemu (SMPS) z czujnikiem temperatury NTC, bezpiecznikiem głównym, zabezpieczeniem przed przeciążeniem, wyzwalanie nadprądowe i wyjście odporne na zwarcie;
- System oszczędzania baterii w czasie postoju urządzenia;
- automatyczna regulacja wysokości, oparcia i podnóżka.

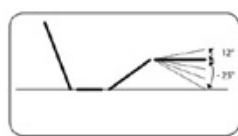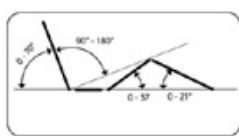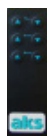

Dane techniczne

Powierzchnia łóżka	85 x 186 cm
Dla materacy o wymiarach	90/100 x 190/200
Wymiary całkowite	85 x 186 cm
Regulacja wysokości bez materaca	~30 do 80 cm
Maksymalna waga pacjenta	135 kg
Napięcie wejściowe	zmienne (100-240 V)

Powierzchnia leżąca łóżka jest regulowana elektrycznie za pomocą pilota.

Jak w 10 krokach zrealizować dofinansowanie do 95% na sprzęt firmy **LeviCare.pl**?

1



Umów się na bezpłatną prezentację ze specjalistą LeviCare:

☎ 796 980 503
✉ info@levicare.pl

2



Po prezentacji w ciągu kilku dni otrzymasz od nas indywidualnie przygotowaną ofertę.

3



Złóż wniosek na likwidację barier technicznych/architektonicznych lub na zakup sprzętu rehabilitacyjnego wraz z ofertą i ewentualnie fakturą proforma do swojego urzędu PCPR*, swojego urzędu MOPS*, MOPR* lub online: <https://sow.pfron.org.pl/>

4



Czekaj na rozpatrzenie wniosku (ok. 30 dni).

5



Podpisz umowę o dofinansowanie.

6



Skontaktuj się z nami i przygotuj: numer umowy, termin realizacji, kwotę dofinansowania oraz kwotę wkładu własnego.

7



Opłać wkład własny na podstawie otrzymanej faktury od LeviCare.

8



Umów się na montaż / dostawę sprzętu w dogodnym terminie.

9



Dostarcz fakturę z opłaconym wkładem własnym do swojego urzędu lub wyślij wersję elektroniczną.

10



Korzystaj z otrzymanego produktu LeviCare 😊

W razie pytań lub dalszych niejasności zachęcamy do kontaktu z naszym Biurem Obsługi Klienta.

Zawsze chętnie udzielimy Państwu niezbędnych informacji.

Zachęcamy do umawiania się na bezpłatną prezentację urządzeń w Państwa domach, prowadzoną przez doświadczonego specjalistę LeviCare.

☎ 796 980 503
✉ info@levicare.pl

*PCPR - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie; MOPS - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej; MOPR - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Skontaktuj się z nami:



796 980 503




info@levicare.pl



www.levicare.sklep.pl



www.levicare.pl

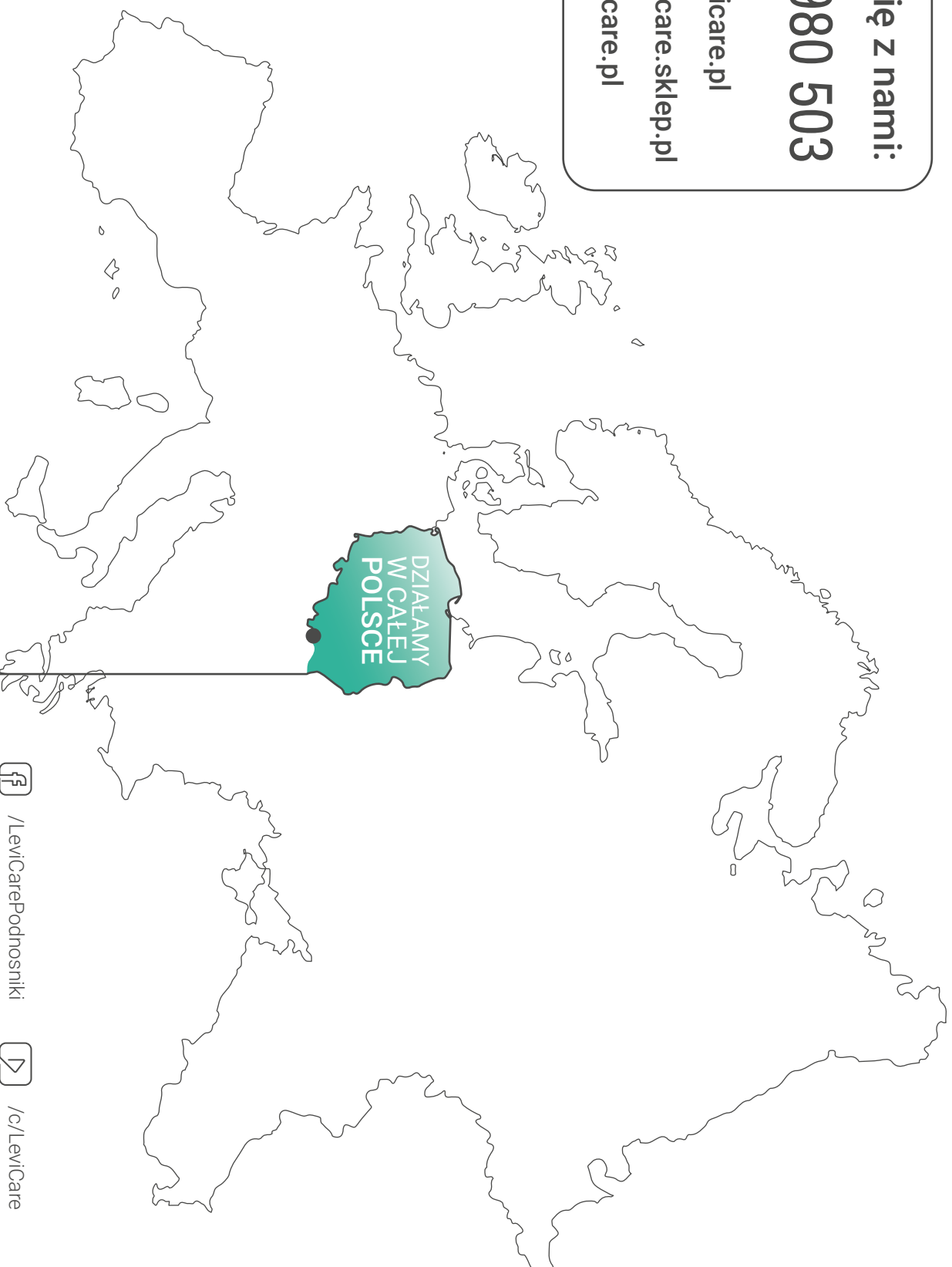

/LeviCarePodnosniki



/c/LeviCare